

# CATALOGUE PRODUITS

## 2024



AURICULOTHÉRAPIE

AURICULOMÉDECINE

THÉRAPIE LASER

THÉRAPIE LUMIÈRE

ACUPUNCTURE

RÉFLEXOLOGIE

**Sedatelec**<sup>®</sup>  
YOUR WAY OF CARE,  
OUR QUALITY DEVICES



CATALOGUE PRODUITS  
**2024**



## SEDATELEC ACCOMPAGNE LE DÉVELOPPEMENT DES MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES

Sedatelec est une SAS au capital de 160 000 euros spécialisée dans la conception et la distribution de matériel médical.

Située près de Lyon, en France, elle emploie une vingtaine de personnes et exporte 80 % de sa production, dans plus de 40 pays, en Europe et dans le monde.

Créée en 1978, la Sedatelec collabore avec le Docteur Paul NOGIER père de l'Auriculothérapie, et met au point la première aiguille stérile semi-permanente pour l'oreille, l'ASP®.

Ensuite Sedatelec **créa les premiers appareils électroniques et Lasers** destinés aux médecins pratiquant ces techniques médicales.

Grâce au développement et à l'essaimage de l'Auriculothérapie puis de l'Auriculomédecine, seconde technique mise au point par le Dr. Nogier, l'activité de Sedatelec se développa et continue de s'étendre dans le monde entier. Par la suite, elle élargit son marché à l'acupuncture et progressivement à d'autres médecines complémentaires (Réflexologie, Photonothérapie®, Etiomédecine...).

### NOTRE MISSION :

- Accompagner le développement des médecines complémentaires.
- Apporter des solutions de qualité technologiques, innovantes et non médicamenteuses.

### NOS VALEURS :

- Qualité
- Bienveillance
- Service
- Professionnalisme
- Respect
- Satisfaction clients



### TROUVEZ NOS CERTIFICATS QUALITÉ SUR NOTRE SITE INTERNET :

Sedatelec s'applique à suivre les réglementations les plus actuelles relatives aux produits de santé avec le souci d'apporter toujours plus de sécurité et de qualité à ses produits. Le système de Management de la Qualité de Sedatelec est certifié par le TÜV SÜD (CE 0123).



## SEDATELEC LA RÉFÉRENCE MONDIALE EN AURICULOTHÉRAPIE



### RAPIDITÉ DU SERVICE

- Traitement de votre commande dans la journée
- Produits disponibles sur stock
- Réseau de distribution dynamique partout dans le monde



### ACCOMPAGNEMENT

- Conseils, aide au choix et formation sur l'ensemble de nos produits
- Communication aux praticiens des dates de formation ou congrès internationaux grâce à l'Agenda Sedatelec



### QUALITÉ

- Étude, conception, et fabrication française
- Moulage, assemblage et emballage des aiguilles ASP® en salle propre
- Conformité à la norme ISO 13485
- Dispositifs médicaux fabriqués selon la réglementation européenne (Directive 93/42 CEE) portant le marquage CE0123
- Certifications MDSAP Canada et Australie, FDA pour certains produits



### SERVICE APRÈS-VENTE

- Garantie deux ans pièces et main d'œuvre contre tout défaut de fabrication
- Réparations de vos appareils jusqu'à 10 ans après l'arrêt de la commercialisation
- Chaque appareil subit les mêmes contrôles qu'un appareil neuf
- Fourniture de nombreuses pièces détachées, même anciennes

#### Pour passer une commande, vos contacts privilégiés :



**Stefanie COCHET**

Responsable Commerciale Export

Email : [stefaniecochet@sedatelec.com](mailto:stefaniecochet@sedatelec.com)

Mobile : +33 (0) 607 986 032

Chemin des Mûriers • F - 69540 Irigny - France

Tél. : +33 (0) 472 663 324 • Fax. : +33 (0) 478 508 903

Email : [contact@sedatelec.com](mailto:contact@sedatelec.com) • Site internet : [www.sedatelec.com](http://www.sedatelec.com)

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30



**Paula BARBOSA**

Assistante Export

Email : [export@sedatelec.com](mailto:export@sedatelec.com)

## SOMMAIRE PAR PRODUIT

<b>AIGUILLES SEMI-PERMANENTES</b>	<b>ASP® Classic 8 - 80 - 200</b>	Auriculothérapie	<b>9</b>
	<b>ASP® Gold 8 - 80 - 200</b>	Auriculothérapie	<b>9</b>
	<b>ASP® Titanium 8 - 80 - 200</b>	Auriculothérapie	<b>9</b>
	<b>Pastilles Adhesives</b>	Auriculothérapie	<b>10</b>
<hr/>			
<b>AIGUILLES PERMANENTES</b>	<b>ASP® Perma 8 - 80</b>	Auriculothérapie	<b>11</b>
<hr/>			
<b>DÉTECTION ET STIMULATION ÉLECTRIQUE</b>	<b>Premio 20DT</b>	Auriculothérapie, Acupuncture et Réflexothérapie	<b>14</b>
	<b>Agistim Duo</b>	Auriculothérapie et Acupuncture	<b>16</b>
<hr/>			
<b>STIMULATION LASER</b>	<b>Premio 30 Evo</b>	Acupuncture et auriculothérapie	<b>20</b>
	<b>Premio 32 Evo</b>	Médecine du sport, kinésithérapie et auriculothérapie	<b>23</b>
	<b>Premio 32 V Evo</b>	Vétérinaire	<b>24</b>
	<b>Premio 32 D</b>	Dentaire	<b>25</b>
<hr/>			
<b>DÉTECTION ET STIMULATION COULEUR</b>	<b>Premio 40 Light</b>	Auriculomédecine	<b>28</b>
<hr/>			
<b>STIMULATION THERMIQUE</b>	<b>Premio 10 Moxa</b>	Acupuncture	<b>32</b>

## SOMMAIRE PAR PRODUIT

<b>INSTRUMENTS ET MATÉRIELS DIDACTIQUES</b>	Palpeurs à pression	<b>34</b>
	Palpeur multi-pression	<b>34</b>
	Bâtonnets de verre	<b>34</b>
	Oreille en silicone	<b>35</b>
	Tampons d'oreille	<b>35</b>
	Mise à la terre patient	<b>35</b>
	Rapporteur anti-tabac ou d'angles 30°	<b>35</b>
	Filtres 1 couleur	<b>36</b>
	Programme couleurs fréquentiel	<b>38</b>
	Disques pour Premio 40 Light	<b>38</b>
	Filtres superposés 2 couleurs	<b>39</b>
	Filtres superposés 3 couleurs	<b>39</b>
	Filtre étoile 7 couleurs	<b>39</b>
	Filtres divers	<b>40</b>
	Anneaux-test Anotest®	<b>40</b>
	Boîte de rangement de filtres	<b>40</b>
Gamme EASYO	<b>41</b>	
Stylets endo-nasal	<b>41</b>	
Ecouvillons	<b>41</b>	
Planches	<b>42</b>	
Livres	<b>44</b>	
<hr/>		
<b>INDEX ALPHABÉTIQUE DES PRODUITS</b>		<b>48</b>
<hr/>		
<b>CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE</b>		<b>50</b>
<hr/>		
<b>SUIVI CLINIQUE</b>		<b>51</b>





## LA RÉFÉRENCE EN AURICULOTHÉRAPIE DU DR PAUL NOGIER

L'ASP® Original ou Aiguille Semi-Permanente de Sedatelec a été créée en France en collaboration avec le Dr Paul Nogier. **Depuis plus de 40 ans** elle est utilisée quotidiennement par de nombreux praticiens, hôpitaux et centres anti-douleur dans le monde.

De nombreuses années de recherche et d'amélioration font qu'aujourd'hui, ce dispositif, permettant la mise en place précise d'une petite aiguille sur les points spécifiques du pavillon auriculaire, a atteint un niveau de **qualité incomparable**.

### L'AURICULOTHÉRAPIE

L'auriculothérapie se base en première approche sur la **somatotopie** qui met en correspondance le pavillon de l'oreille et le système nerveux central via le tronc cérébral.

En effet, l'oreille contient des "Complexes Neuro-Vasculaires" (CNV) dont la stimulation a des effets très complexes, non seulement neurologiques mais aussi neuro-sécrétoires et même neuro-immunitaires et neuro-vasculaires.

Contrairement à ce qui est le plus souvent cru ou imaginé, l'auriculothérapie ne prend pas sa source dans l'acupuncture, car elle ne se base pas sur le concept d'énergie si cher à la médecine traditionnelle chinoise. De plus, un point d'acupuncture existe en permanence, tandis qu'en auriculothérapie, **le point n'est détectable qu'en cas de pathologie** sous-jacente symptomatique (hors points maîtres).



### POINTS FORTS

- Application rapide, précise et sans risque de contamination
- Forme originale permettant une stimulation prolongée du point auriculaire (pouvant aller jusqu'à quelques jours)
- Le « clic » Sedatelec montre une qualité irréprochable de l'injecteur, fruit de plus de 40 ans d'expérience
- L'aimant bipolaire placé dans l'applicateur permet de stimuler le point après la mise en place de l'aiguille (ASP® Classic et Gold)
- Fabriquée par Sedatelec en France, en salle propre, qualité parfaite et excellente tenue des matériaux dans le temps
- Aiguille à usage unique et stérilisée par rayonnement Gamma (> 25 kGy, date de péremption à 5 ans). Marquage CE 0123



## AIGUILLE ASP® ORIGINAL : 3 MÉTAUX AU CHOIX

### CLASSIC : AIGUILLE EN ACIER INOX MÉDICAL AVEC AIMANT DE STIMULATION

L'ASP® en acier correspond à l'Aiguille Semi-Permanente conçue au début de l'auriculothérapie. Le produit s'est amélioré d'année en année tout en restant fidèle aux critères définis par le Dr Paul Nogier. Dispositif médical classe IIa.



#### 110614 - ASPA200 - ASP® CLASSIC 200 AIGUILLES

17,5x11,5x5,5 cm	230 g	Conditionnement : Par multiples de 10
------------------	-------	---------------------------------------

#### 110624 - ASPA80 - ASP® CLASSIC 80 AIGUILLES

17,5x5,5x4,5 cm	100 g	Conditionnement : Par multiples de 25
-----------------	-------	---------------------------------------

#### 110636 - ASPA8 - ASP® CLASSIC 8 AIGUILLES

16,5x6x1 cm	25 g	Conditionnement : Par multiples de 25
-------------	------	---------------------------------------

### GOLD : AIGUILLE EN ACIER INOX MÉDICAL RECOUVERT D'UNE PELLICULE D'OR PUR À 99,7%

Aiguille en acier recouvert d'une pellicule d'or avec aimant de stimulation bipolaire. L'ASP® Gold sera avantageusement utilisée chez certains patients allergiques. Dispositif médical classe IIa.



#### 110615 - ASPG200 - ASP® GOLD 200 AIGUILLES

17,5x11,5x5,5 cm	230 g	Conditionnement : Par multiples de 10
------------------	-------	---------------------------------------

#### 110625 - ASPG80 - ASP® GOLD 80 AIGUILLES

17,5x5,5x4,5 cm	100 g	Conditionnement : Par multiples de 25
-----------------	-------	---------------------------------------

#### 110637 - ASPG8 - ASP® GOLD 8 AIGUILLES

16,5x6x1 cm	25 g	Conditionnement : Par multiples de 25
-------------	------	---------------------------------------

### TITANIUM : AIGUILLE EN TITANE MÉDICAL

Aiguille en Titane grade 5 médical. Cette ASP® qui présente le niveau de biocompatibilité maximal sera privilégiée pour les traitements des pathologies nécessitant une implantation de longue durée et fortement recommandée pour les patients à risques: diabétiques, immuno-déficients ou présentant des allergies multiples. Étant amagnétique, elle peut rester en place lors d'un examen sous IRM. Dispositif médical classe IIa.



#### 110616 - ASPT200 - ASP® TITANIUM 200 AIGUILLES

17,5x11,5x5,5 cm	230g	Conditionnement : Par multiples de 10
------------------	------	---------------------------------------

#### 110626 - ASPT80 - ASP® TITANIUM 80 AIGUILLES

17,5x5,5x4,5 cm	100g	Conditionnement : Par multiples de 25
-----------------	------	---------------------------------------


#### 110638 - ASPT8 - ASP® TITANIUM 8 AIGUILLES

16,5x6x1 cm	25g	Conditionnement : Par multiples de 25
-------------	-----	---------------------------------------

## PASTILLES ADHÉSIVES

Les pastilles adhésives fournies avec les ASP® sont fabriquées avec un support microporeux et un film adhésif hypoallergénique. Elles sont utilisées pour protéger la tête de l'aiguille.

Dispositif médical Classe I.

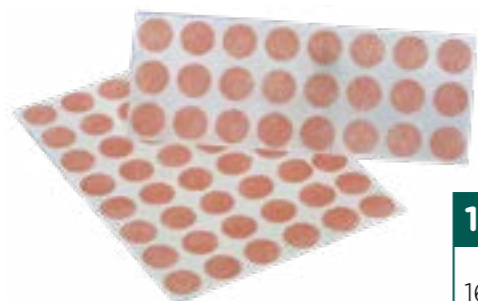

### 103621 - ASPLAST 600 - PASTILLES ADHÉSIVES 120x5

16,5x6x1 cm

25 g

Conditionnement :  
par paquet de 600 pastilles

## CONSEILS D'UTILISATION DES ASP®

1. Désinfecter l'oreille du patient à l'alcool à 70° et attendre 30 secondes l'évaporation.
2. Vérifier l'intégrité du blister et retirer l'injecteur de son emballage.
3. Positionner l'extrémité de l'injecteur sur le point à traiter et appuyer, perpendiculairement à la surface de la peau. Le « clic » caractéristique indique que l'ASP® est bien implantée.
4. Protéger l'aiguille par une pastille adhésive.
5. L'injecteur des ASP® Classic comporte à son extrémité un aimant bipolaire spécialement conçu pour réactiver périodiquement l'effet de l'aiguille implantée. L'injecteur muni de l'aimant peut être confié au patient dans ce but.
6. Ordinairement l'aiguille tombe d'elle-même après quelques jours mais elle peut être retirée à l'aide d'une petite pince à épiler à tout moment.




## AIGUILLE AURICULAIRE PERMANENTE ASP® PERMA

L'aiguille auriculaire permanente ASP® Perma est un dispositif spécifique permettant l'**implantation sous-cutanée** d'une petite aiguille en Titane massif.

Celle-ci permet une stimulation auriculaire durable pour les affections ou douleurs chroniques.

Dispositif médical classe IIb.

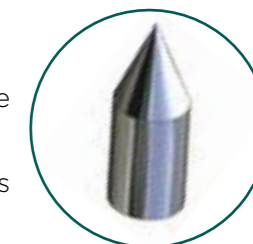

## POINTS FORTS

- Aiguille en titane massif grade 4 médical, 100% biocompatible
- Application rapide, précise et sans risque de contamination
- Implantation sous-cutanée avec l'applicateur unitaire à piston métallique, précis et stérile
- Fabriquée par Sedatelec en France, en salle propre, qualité parfaite et excellente biocompatibilité dans le temps
- Stimulation prolongée sans limitation
- Etant amagnétique, il n'y a pas de risque patient lors d'un examen sous IRM



### 11180 - ASPA80 - ASP® CLASSIC 80 AIGUILLES

17,5x5,5x4,5 cm

100 g

Conditionnement : Par multiples de 25

### 11181 - ASPA8 - ASP® CLASSIC 8 AIGUILLES

16,5x6x1 cm

25 g

Conditionnement : Par multiples de 25

## CONSEILS D'UTILISATION ASP® PERMA

Lors de la pose d'une ASP® Perma, il est bien sûr indispensable avant l'implantation de désinfecter le point d'Auriculothérapie. L'alcool à 70° est un moyen simple et efficace sous réserve de bien attendre son évaporation environ 30 secondes.

De plus, le nettoyage et la désinfection à l'alcool du pavillon auriculaire facilitent grandement l'utilisation éventuelle d'un détecteur électrique (Premio 20 DT) pour localiser les points avec précision.

Son retrait éventuel est possible par un geste de petite chirurgie, avec une cicatrisation très rapide.

*Ces aiguilles doivent être utilisées par du personnel médical formé aux techniques d'acupuncture auriculaire par implantation, elles se substituent à une pose renouvelée d'ASP® Original (Classic, Gold ou Titanium, voir page 8 à 10).*






# LA DÉTECTION ET LA STIMULATION ÉLECTRIQUE

## PRINCIPES DE LA DÉTECTION ÉLECTRIQUE

### EN ACUPUNCTURE

Le Dr Niboyet a mis en évidence une différence de résistance cutanée entre les points d'acupuncture et leur environnement proche caractérisé par une **baisse d'impédance**.

Sur le corps, les points d'acupuncture sont relativement espacés les uns des autres, et le **détecteur à une seule électrode** (détection directe) suffit pour en préciser la position.

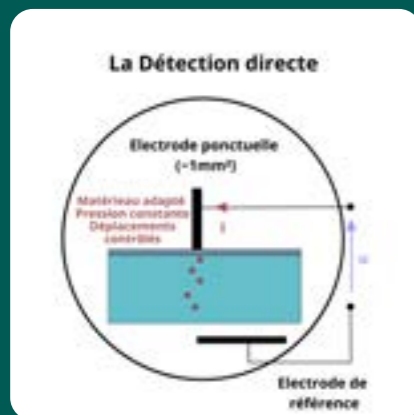


### LES CARACTÉRISTIQUES D'UN BON DÉTECTEUR DE POINTS :

- Un courant de mesure suffisamment faible pour ne pas perturber le point
- Un système de détection différentielle : mesure du point et de son environnement
- Un seuil de sensibilité auto-ajustable en fonction des caractéristiques de résistance cutanée propres à chacun
- Une poignée de masse tenue par le patient, isolant le praticien du circuit de mesure

### EN AURICULOTHÉRAPIE

En auriculothérapie, il est nécessaire d'effectuer une **double mesure** très précise des caractéristiques électriques **du point et de son environnement**. Les points d'oreille étant très proches les uns des autres, seule la **détection différentielle** permet de localiser précisément et de façon fiable les points pathologiques du pavillon auriculaire. C'est ce procédé de mesure que Sedatelec a breveté il y a plusieurs années.

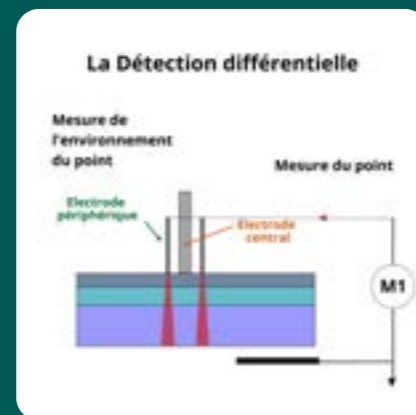

### COMMENT FONCTIONNE UN DÉTECTEUR DIFFÉRENTIEL ?

C'est un système de mesure à 3 électrodes; **une électrode de référence** au contact du patient (poignée de masse) et **un capteur muni de deux électrodes coaxiales**. L'électrode centrale mesure le point, l'électrode périphérique, son environnement proche.

Un système électronique intégré à l'appareil traite les deux mesures et, en fonction de la différence de mesure d'impédance calculée, informe sur les caractéristiques du point.

## STIMULATION ÉLECTRIQUE

La stimulation électrique est utilisée pour différents types d'applications : l'entretien et la rééducation fonctionnelle par la stimulation musculaire (NMES), la diminution de la douleur par la stimulation des nerfs et des trigger points (TENS) ainsi qu'en acupuncture classique par la stimulation des points du corps (EA) ou d'auriculothérapie.

Les appareils fabriqués par Sedatelec sont des stimulateurs spécialement étudiés pour être efficaces dans la stimulation des points d'acupuncture et dans la diminution de la douleur.

### LA QUALITÉ DE LA STIMULATION DÉPEND DE PLUSIEURS FACTEURS :

- une forme d'onde spécifique pour la stimulation de points, délivrée par un générateur de courant,
- une sécurité d'utilisation optimale : aucun risque de brûlure de la peau,
- une ou plusieurs fréquences de stimulation efficace, en particulier l'utilisation des fréquences Nogier\*\*

En électro-acupuncture, la stimulation électrique renforce l'effet de l'aiguille. Le temps de stimulation est plus court qu'avec une stimulation par aiguilles seules. Les électrodes cutanées peuvent également être utilisées pour les patients craintifs.

Dans la gestion de la douleur, certains de nos appareils permettent de faire varier les fréquences pour obtenir un effet thérapeutique particulier par exemple antalgique par libération d'endorphines en utilisant une fréquence basse ou par inhibition sensitive segmentaire en appliquant une fréquence élevée.

### LA DYNAMIQUE DU QI



Le Qi exprime cette notion de Souffle Vital, d'Énergie, de Force en action, il représente la Vie, il symbolise le Mouvement. Cette énergie circule en continu dans les méridiens, exprime le Yin et le Yang, dans leur équilibre et dans le cycle régulier de leur alternance. Elle permet le fonctionnement harmonieux de l'être vivant, dans son individualité, intégré dans son environnement immédiat comme dans la globalité de l'Univers.

Lors de l'examen clinique approfondi et global, après le repérage de dysfonctionnement et l'analyse des causes, il faut tonifier là où l'énergie manque, disperser là où elle est en excès, harmoniser, réorienter le flux, lorsque les points de croisement sont perturbés.


### LA VOBULATION POUR PRÉSERVER LE QI :

La fréquence des impulsions conditionne la réaction, et si cette fréquence reste fixe trop longtemps, le corps ne réagit plus, devenant indifférent à la stimulation.

Une stimulation sera efficace si elle est dynamique, si elle s'inscrit dans la variation, comme le Qi s'inscrit en mouvement perpétuel dans le réseau des méridiens.

De même que le Qi va croître puis décroître dans chaque méridien, la stimulation vobulée va augmenter ou diminuer le nombre d'impulsions émises par seconde, selon une progression mathématique complexe.

**Elle s'identifie aux techniques traditionnelles, où le mouvement de l'aiguille, que ce soit le sens de rotation ou la variation de profondeur, impose localement une information particulière.**

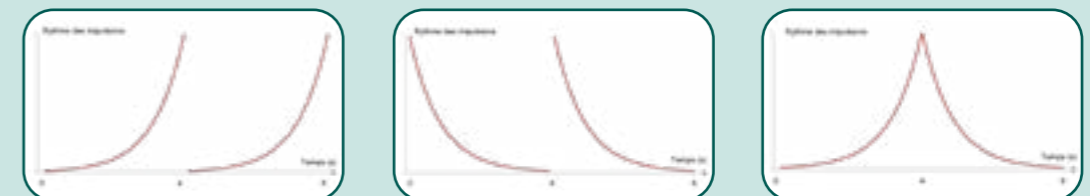

**Dispersion, tonification, harmonisation..., l'information biologique portée par la vobulation.**

# premio 20 DT

## DÉTECTION ET STIMULATION ÉLECTRIQUE



Appareil de détection et de stimulation électrique, révolutionnaire dans sa conception et à la pointe de la technologie.

À l'origine des premiers détecteurs de points auriculaires (Diascope®, Puntoscope® Servoscope®, Agiscop®) - Sedatelec a concentré tout son savoir-faire et son expertise dans l'élaboration d'une nouvelle génération avec le Premio 20 DT. Dispositif médical classe IIa.

### POINTS FORTS

- Détection ultra précise avec lecture directe en bout de stylet
- Utilisation simplifiée avec affichage continu des variations de détection
- Appareil intuitif avec clavier ergonomique et aides visuelles et sonores
- Calibrage automatique de l'intensité de stimulation de point
- Prêt à l'emploi en un instant : pas de câble à installer
- Poignée de masse tenue par le patient permettant d'isoler le praticien du circuit

### 111672 - PREMIO 20DT

26x20x7 cm - 450 g - Malette de protection moussée

La malette contient :


- Le Premio 20DT
- Un mode d'emploi
- Un embout ERT spécial acupuncture
- Une pile CR123A



Compatible avec des piles rechargeable CR123A du commerce, tension 3.0-3.7 V, 800-1600 mAh.

#### OPTIONS POUR CET APPAREIL :

A	112808 Premio 20D Détecteur électrique
B	112802 PREM-04 Embout ERT
C	113393 Premio 20DT VET Version vétérinaire

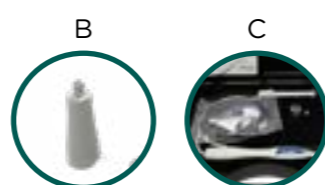

### DÉTECTION EN AURICULOTHÉRAPIE

Mesure de haute précision avec le détecteur différentiel

- Détection possible en baisse (Gold) ou en hausse (Silver) d'impédance
- Courant de mesure suffisamment faible pour ne pas perturber le point
- Affichage visuel et auditif de l'intensité du point détecté (sur une échelle de 9 niveaux)



### DÉTECTION EN ACUPUNCTURE


Mesure directe de la baisse d'impédance, avec l'embout ERT à pointe douce

- Lecture directe et instantanée de la mesure sur le stylet, confirmée par un «bip sonore»
- Mémorisation du point cutané détecté avec la plus faible impédance
- Affichage visuel et auditif de l'intensité du point détecté (sur une échelle de 4 niveaux)


### UNE STIMULATION EFFICACE

En stimulation, un simple appui sur le clavier, sans quitter des yeux le point à traiter, vous permet de sélectionner une stimulation appropriée :


- Par balayage des fréquences Nogier\*\* (idéal pour l'auriculo)
- Par vobulation de fréquence : Alternée pour l'harmonisation; ascendante entre 1 et 100Hz en tonification; descendante entre 100 et 1Hz en dispersion

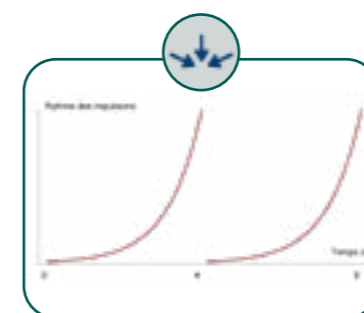

Tonification

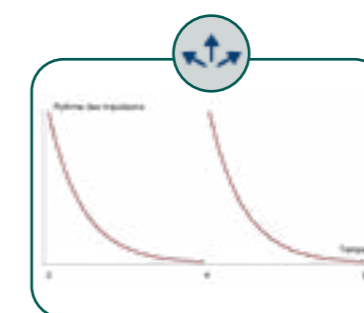

Dispersion

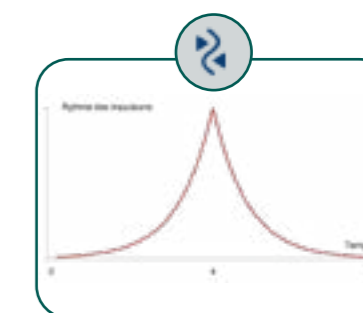

Harmonisation

### LA VOBULATION : INNOVATION SEDATELEC

Sedatelec a mis au point une gestion particulière des impulsions physiologiques, basée non plus sur les fréquences, répétitives par nature, mais sur la dynamique, l'accélération ou la décélération, la variation du signal étant considérée comme base de l'information décodée par l'organisme.

Une stimulation sera efficace si elle est dynamique, si elle s'inscrit dans la variation, comme le Qi s'inscrit en mouvement perpétuel dans le réseau des méridiens.

De même que le Qi va croître puis décroître dans chaque méridien, la stimulation vobulée va augmenter ou diminuer le nombre d'impulsions émises par seconde, selon une progression mathématique complexe.





# AGISTIM DUO

## STIMULATION ÉLECTRIQUE



Stimulateur électrique permettant de connecter jusqu'à 8 ou 16 aiguilles. Utilisé en électro-acupuncture, pour accélérer le travail des aiguilles, en électro-lipolyse pour réduire les lipodystrophies localisées, en neurostimulation pour stimuler les fibres nerveuses avec les électrodes et en analgésie pour libérer les endorphines en fonction des fréquences choisies. Dispositif médical classe IIa.

### POINTS FORTS

- Conçu autour de 2 générateurs de courant totalement indépendants et isolés
- Connecteurs assurant un contact parfait et constant avec les aiguilles tout en garantissant une isolation totale de la peau
- Réglage de l'intensité sur chacun des canaux avec système de sécurité intégré autonome
- Variation automatique de la fréquence sélectionnée évitant une accoutumance du corps à la stimulation (OFSC)

### 108268 - AGISTIM DUO

30x25x6 cm - 1270 g - Malette de protection moussée

La malette contient :

- L'Agistim Duo et son mode d'emploi
- 1 connecteur aiguilles Blanc/Gris (109285 AGIDUO-011)
- 1 connecteur aiguilles Blanc/Rose (109286 AGIDUO-012)
- 1 connecteur aiguilles Blanc/Violet (109287 AGIDUO-013)
- 1 connecteur aiguilles Blanc/Vert (109288 AGIDUO-014)
- Boitier de test (109290 AGIDUO-05)
- Alimentation 110-240 V (112378 AGIDUO-063)



#### OPTIONS POUR CET APPAREIL :

A	<b>107760 AGIDUO-09</b> Styl Module
B	<b>109315 AGIDUO-031</b> 4 Needle Module Gris
C	<b>109316 AGIDUO-032</b> 4 Needle Module Rose
D	<b>109317 AGIDUO-033</b> 4 Needle Module Violet
E	<b>109318 AGIDUO-034</b> 4 Needle Module Vert
F	<b>108843 AGIDUO-03</b> Kit Lipolyse « 4 Needle Module »

### UNE STIMULATION EFFICACE

- 8 modes d'émission / stimulation différents
- Stimulation continue, avec des temps de repos variables
- Fonction balayage des fréquences
- Impulsions bi-phasiques asymétriques à moyenne nulle
- Parfaite stabilité de l'intensité du courant quelle que soit l'impédance du point
- Oscillation Fréquentielle Statistiquement Contrôlée, évitant une accoutumance du corps à la stimulation
- Réglage de la fréquence par pas de 0.1Hz jusqu'à 10Hz, puis par pas de 1Hz jusqu'à 99Hz



### OPTIONS DE L'AGISTIM DUO



#### STYL MODULE

Ce dispositif permet de réaliser une stimulation électrique très précise sur un point sans pose d'aiguille ou d'électrodes.

Très utile en particulier sur les points d'oreille. Possibilité de stimuler avec les fréquences de Nogier\*\* et toute fréquence comprise entre 1 et 99 Hz.



#### 4 NEEDLE MODULE

Il permet de doubler le nombre d'aiguilles connectées à l'Agistim Duo. Système d'attache très simple : accrochage de l'aiguille d'une seule main par traction sur le fil.



#### KIT LIPOLYSE

Ensemble de 4 Needle Module utilisés pour pratiquer l'acupuncture ou l'électro-lipolyse vous permettant de connecter jusqu'à 16 aiguilles.


Fourni avec un mode d'emploi.

### L'OSCILLATION FRÉQUENTIELLE STATISTIQUEMENT CONTRÔLÉE : UN CONCEPT UNIQUE DE FLUCTUATION DE FRÉQUENCE

Sedatelec a inventé un concept unique de fluctuation de fréquence autour de la fréquence de référence choisie pour la stimulation : **L'Oscillation Fréquentielle Statistiquement Contrôlée (OFSC)**.

Par une gestion électronique originale, l'Agistim Duo émet des stimulations électriques très proches de la fréquence choisie pour son effet physiologique, mais avec une variation minimale et aléatoire qui évite l'accoutumance à ce rythme de stimulation.

Pour le corps, ce n'est jamais deux fois exactement la même fréquence, et il reste attentif et réactif.

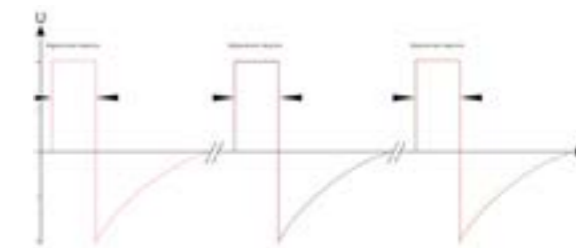

## LA STIMULATION LASER

### LES DEUX GRANDS TYPES D'APPLICATION, LA THÉRAPIE RÉFLEXE ET LA STIMULATION LOCALE

#### STIMULATION DU POINT - ACTION À DISTANCE

En remplacement de l'aiguille, le Laser est particulièrement apprécié. Son utilisation présente des caractéristiques intéressantes :

- Elle est **rapide**, 30s à 60s, suivant la puissance, si la pièce à main est appliquée directement sur le point pour éviter la dispersion du faisceau
- Elle est **indolore** ce qui facilite grandement la stimulation des enfants ou des patients craintifs à la pose d'aiguilles
- Elle est **stérile** par nature car ne nécessite pas d'effraction cutanée


#### STIMULATION DE LA ZONE - ACTION LOCALE

Lors de ses recherches, le Docteur Paul Nogier a mis au point différentes associations de fréquences à l'origine de 3 actions efficaces :

- **Action antalgique** : Utilisation dans le cas de douleurs localisées, de foulures, d'abcès dentaires...
- **Action de régénération tissulaire** : Accélération de la cicatrisation, atténuation des aphtes, brûlures, rides...
- **Action myorelaxante** : Douleurs musculaires, trismus, etc...

#### LA BIOSTIMULATION LASER PERMET DE :

- Réguler les émissions d'influx nerveux : **la douleur et l'inflammation s'amenuisent**
- Stimuler les fibroblastes pour accroître la production de collagène : **accélère la cicatrisation**
- Apporter de l'énergie aux chromophores : **libération d'ATP par la mitochondrie permettant la synthèse protéique**
- Modifier et activer les enzymes pour initier ou entretenir les réactions biologiques nécessaires **au bon fonctionnement cellulaire**

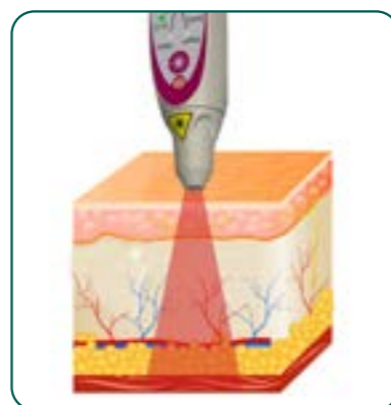


## COMMENT CHOISIR VOTRE LASER ?

### LA LONGUEUR D'ONDE

Sedatelec a choisi d'utiliser des sources émettant à une longueur d'onde d'environ 905 nm.


Dans cette zone, le rayonnement est peu absorbé par l'hémoglobine, la mélanine et l'eau. Le faisceau Laser peut donc pénétrer les couches tissulaires sans échauffement destructif.

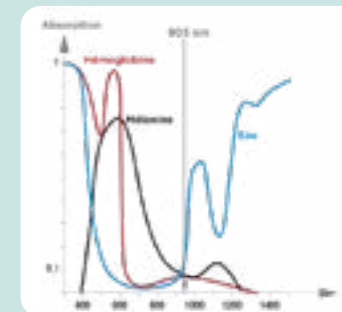

### LA PUISSANCE CRÊTE

Il s'agit de la puissance maximale atteinte pendant une période très courte de stimulation.


- Permet d'envoyer la puissance nécessaire pour pénétrer les tissus profonds
- Associée à une émission pulsée ou super-pulsée, avec des impulsions <100 ns, est sans effet thermique destructeur

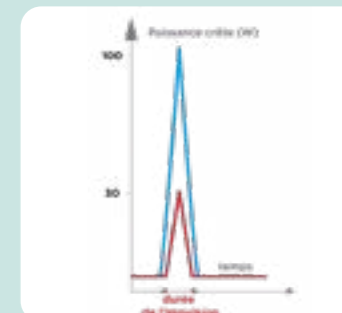

### LE TYPE D'ÉMISSION

Le type d'émission du laser aura un impact sur l'apport d'énergie aux cellules et sur la dynamique de la stimulation.

- **Modulée** : émission continue mais interrompue de façon répétitive, selon un rythme défini
- **Pulsée** : émission par des impulsions très courtes répétées (<100 ns) avec un temps de repos important
- **Superpulsée** : émission par des rafales d'impulsions avec un temps de repos supérieur au temps de stimulation

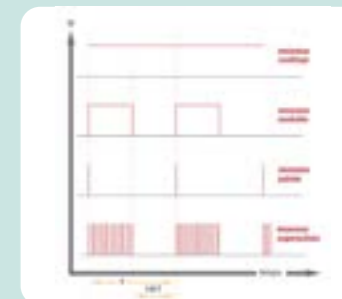

### USAGE

Le laser froid est un moyen sûr, efficace, indolore et stérile de stimuler, réguler ou relancer les fonctions biologiques d'un organisme.



Acupuncture Kinésithérapie Réflexologie Vétérinaire Odontologie Sages-femmes Esthétique

### LES FRÉQUENCES DE NOGIER

Le Dr Paul Nogier a montré il y a plus de 50 ans que l'organisme était sensible à des stimuli fréquentés et réagissait différemment suivant les fréquences. Depuis, d'autres chercheurs ont également établi le rôle particulier d'autres fréquences et vérifié que l'efficacité du rayon Laser super-pulsé, aux fréquences choisies, était bien supérieure au simple effet photonique de la source Laser proprement dite.

Découvrez les fréquences : voir page 27.



# premio 30 evo

Laser duo



Laser froid qui permet d'effectuer une **stimulation infrarouge indolore des points d'acupuncture**, y compris de la face et des zones sensibles, des points auriculaires et des trigger points.

Dispositif médical classe IIa.

## POINTS FORTS

- **Longueur d'onde 905 nm** : zone dans laquelle l'absorption par l'eau et la dispersion par l'hémoglobine et la mélanine sont les moindres
- **Émission pulsée** : pulse <100 ns délivrant une énergie faible de 0,15 à 1,25 J / 30 s pour éviter l'échauffement cutané
- Stimulation par **vobulation de fréquence** unique à Sedatelec permettant de reproduire l'effet de l'aiguille
- **Autonomie** d'environ sept heures de fonctionnement en continu
- **Ergonomique** : 4 programmes de stimulation à accès direct

## 112048 - PREMIO 30 Evo LASER DUO

40x30x7 cm - 1200 g - Malette de protection moussée

La malette contient :

- Le Premio 30 EVO Laser Duo
- Un mode d'emploi
- Un testeur de contrôle d'émission
- Une paire de lunettes de protection
- Un chargeur rapide




### OPTIONS POUR CET APPAREIL :

A	<b>112747 PREM-03</b> Support Premio
B	<b>113091 PREM-05</b> Embout red. de puissance
C	<b>111032 MOD-52</b> Lunettes laser
D	<b>113222 PREM-03H</b> Holster pour Premio laser

### ADAPTATEUR PREMIO :

113129 PREM-01-EU-V2	EU
113130 PREM-01-US-V2	US
113131 PREM-01-UK-V2	UK

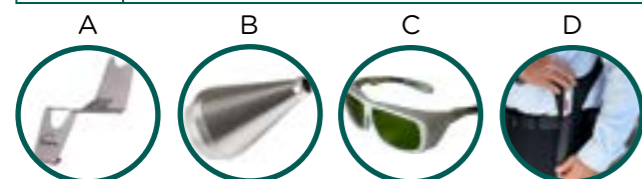

 **Emission laser invisible.**  
Ne pas exposer le rayon laser vers les yeux.  
Classification 3B d'après IEC 60825-1



## STIMULATION EN ACUPUNCTURE

**3 Modes de stimulation avec la vobulation de fréquences :**

- Tonification de 100 à 10 000 Hz
- Dispersion de 10 000 à 100 Hz
- Harmonisation : alternance de tonification et dispersion




## STIMULATION EN AURICULOTHÉRAPIE


**Stimulation balayage des fréquences de Nogier\*\* (A à G) :** ce mode garantit une stimulation des points pathologiques en Auriculothérapie la plus efficace (douleurs, troubles physiologiques ou troubles fonctionnels, addictions, ...).

## UNE STIMULATION EFFICACE


- 2 Puissances adaptées :  
15 W : Faible pour les points superficiels (visage, oreilles, mains...)  
100 W : Forte pour les points profonds (autres points du corps)
- Des durées d'impulsion très courtes
- De faibles énergies préservant le Qi

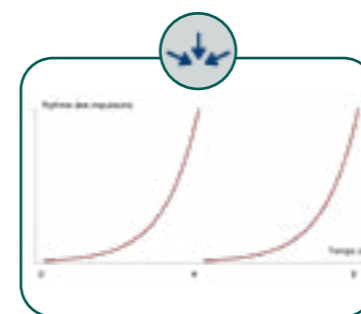

Tonification

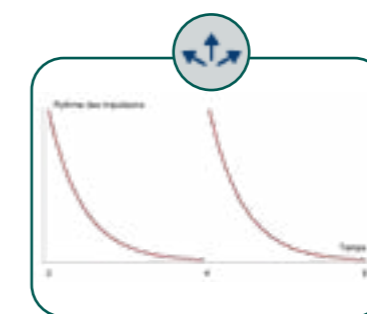

Dispersion

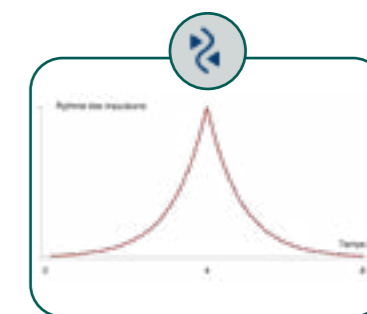

Harmonisation

## LA VOBULATION : INNOVATION SEDATELEC



Sedatelec a mis au point une gestion particulière des impulsions physiologiques, basée non plus sur les fréquences, répétitives par nature, mais sur la dynamique, l'accélération ou la décélération, la variation du signal étant considérée comme base de l'information décodée par l'organisme.

Une stimulation sera efficace si elle est dynamique, si elle s'inscrit dans la variation, comme le Qi s'inscrit en mouvement perpétuel dans le réseau des méridiens.

De même que le Qi va croître puis décroître dans chaque méridien, la stimulation vobulée va augmenter ou diminuer le nombre d'impulsions émises par seconde, selon une progression mathématique complexe.





premio 32  
STIMULATION LASER

premio 32 evo  
premio 32 v evo  
premio 32 D

premio 32 evo  
Laser A-G program



## CARACTÉRISTIQUES

- **Longueur d'onde 905 nm** : zone dans laquelle l'absorption par l'eau et la dispersion par l'hémoglobine et la mélanine sont les moindres
- **Stimulation super-pulsée** avec une puissance crête très importante (jusqu'à 100 W). Les cellules reçoivent donc une puissance très forte pendant un temps très court (environ 100 ns) pour éviter tout échauffement destructeur, et ceci avec une fréquence de répétition choisie.
- **Ergonomique** : 4 programmes de stimulation et accès direct aux fréquences de Nogier\*\*
- Eclairage de la zone de travail

## LE PLUS SEDATELEC : LES FREQUENCES DE NOGIER

### ANTALGIQUE (FRÉQUENCES E ET G)

Réduit la transmission de la douleur au système nerveux central. Son action locale sur le processus inflammatoire améliore le ressenti du patient et la qualité de la réaction locale.

### RÉGÉNERATION (FRÉQUENCES A, B ET F)

Accélère la reconstruction tissulaire, restaure les fonctions cellulaires, accélère les processus de cicatrisation et de régénération en surface comme en profondeur.

### RELAXATION (FRÉQUENCES C, D ET G)

Facilite le relâchement des tensions et contractures.

### BALAYAGE DES FRÉQUENCES DE NOGIER\*\*

Ce type d'émission vous garantit une stimulation des zones pathologiques quelle qu'en soit l'origine (douleurs, troubles physiologiques ou troubles fonctionnels, addictions,...). Il permet l'émission successive par balayage de toutes les fréquences de Nogier\*\* (Fréquences A, B, C, D, E, F et G).

### SÉLECTION FRÉQUENTIELLE INDIVIDUELLE

Chacune des 7 fréquences de Nogier\*\* peut être choisie individuellement pour agir sur une fonction physiologique particulière.



Laser universel de photobiomodulation. Il permet un **travail sur du point et de la zone** et délivre une action antalgique, régénérative, myorelaxante locale rapide et intense sans effet secondaire.

Dispositif médical classe IIa.

**NOUVEAU !**

Plus puissant !  
Une stimulation plus rapide !  
Une stimulation plus profonde !

## POINTS FORTS

- **Puissance crête de 100 W** permettant d'atteindre les zones musculaires profondes
- Énergie constante de **5 J/min** grâce au mode d'émission super pulsé
- Embout réducteur de puissance ERP idéal pour les zones du visage ou de l'oreille

### 112049 - PREMIO 32 Evo LASER A-G PROGRAM

40x30x7 cm - 1200 g - Malette de protection moussée

La malette contient :

- Le Premio 32 Evo Laser A-G Program
- Un mode d'emploi
- Un testeur de contrôle d'émission
- Une paire de lunettes de protection
- Un chargeur rapide
- Un embout réduction de puissance



#### OPTIONS POUR CET APPAREIL :

A	<b>112747 PREM-03</b> Support Premio
B	<b>113091 PREM-05</b> Embout red. de puissance
C	<b>111032 MOD-52</b> Lunettes laser
D	<b>113222 PREM-03H</b> Holster pour Premio laser



#### ADAPTATEUR PREMIO :

113129 PREM-01-EU-V2	EU
113130 PREM-01-US-V2	US
113131 PREM-01-UK-V2	UK



Emission laser invisible.  
Ne pas exposer le rayon laser vers les yeux.  
Classification 3B d'après IEC 60825-1



# premio 32 v evo

STIMULATION LASER VÉTÉRINAIRE



Laser de photobiomodulation pour les animaux. Il permet un travail sur du point et de la zone et délivre une action antalgique, régénérative, myorelaxante locale rapide et intense sans effet secondaire.

Dispositif médical classe IIa.

## POINTS FORTS

- **Puissance crête de 100 W** pour une meilleure pénétration dans les tissus
- Énergie constante de **5 J/min** grâce au mode d'émission super pulsé
- **Embout en acier renforcé** pour protéger la diode Laser de l'abrasion cutanée de l'animal
- Des fréquences dédiées pour mieux prendre en compte la restauration des fonctions cellulaires (gingivite du chat), la reconstruction tissulaire ainsi que les processus de cicatrisation

### 112049 - PREMIO 32 V EVO LASER

40x30x7 cm - 1200 g - Malette de protection moussée

La malette contient :

- Le Premio 32 Evo Laser A-G Program
- Un mode d'emploi
- Un testeur de contrôle d'émission
- 2 embouts acier renforcé (112471 PREM-02)
- Une paire de lunettes de protection (111032 MOD-52)
- Un chargeur rapide
- Un embout réduction de puissance




#### ADAPTATEUR PREMIO :

113129 PREM-01-EU-V2	EU
113130 PREM-01-US-V2	US
113131 PREM-01-UK-V2	UK

#### OPTIONS POUR CET APPAREIL :

A	<b>112747 PREM-03</b> Support Premio
B	<b>113091 PREM-05</b> Embout red. de puissance
C	<b>111032 MOD-52</b> Lunettes laser
D	<b>113222 PREM-03H</b> Holster pour Premio laser

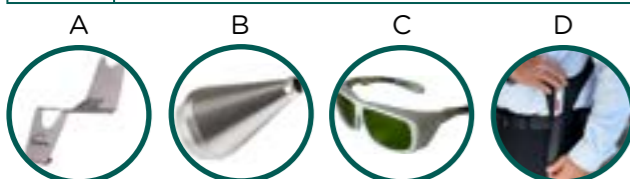

 Emission laser invisible. Ne pas exposer le rayon laser vers les yeux. Classification 3B d'après IEC 60825-1

# premio 32 D evo

STIMULATION LASER DENTAIRE



Laser de photobiomodulation dentaire. Il délivre une action antalgique, régénérative, myorelaxante locale rapide et intense sans effet secondaire, favorisant l'hémostase.

Dispositif médical classe IIa.

## POINTS FORTS

- **Puissance crête de 75 W** pour une meilleure pénétration dans les tissus
- Énergie constante de **1,2 J ou 1,8 J/min** grâce au mode d'émission super pulsé
- Précision de l'application en bouche par **fibre optique coudée**
- Des fréquences dédiées actives sur la génération du cal osseux, sur les contractions musculaires (trismus) et sur les suites cicatricielles et algiques d'avulsions dentaires

### 112049 - PREMIO 32 D EVO LASER

40x30x7 cm - 1200 g - Malette de protection moussée

La malette contient :

- Le Premio 32 D EVO laser
- Un mode d'emploi
- Deux fibres optiques amovibles et stérilisables
- Une clé «dentaire»
- Une clé «corps»
- Un testeur de contrôle d'émission
- Une paire de lunettes de protection
- Un chargeur rapide



#### OPTIONS POUR CET APPAREIL :

A	<b>112747 PREM-03</b> Support Premio
B	<b>111032 MOD-52</b> Lunettes laser



 Emission laser invisible. Ne pas exposer le rayon laser vers les yeux. Classification 3B d'après IEC 60825-1

#### ADAPTATEUR PREMIO :

113129 PREM-01-EU-V2	EU
113130 PREM-01-US-V2	US
113131 PREM-01-UK-V2	UK



## DÉTECTION ET STIMULATION COULEUR

### L'AURICULOMÉDECINE ET LA PHOTONOTHÉRAPIE®



#### L'AURICULOMÉDECINE

Paul Nogier s'est rendu compte fortuitement en 1966 que lorsqu'il exerçait une pression légère sur l'oreille, il observait une diminution ou une augmentation du pouls radial. Le rythme ne variait pas, mais il semblait que le pouls radial devenait plus ou moins fort.

Après avoir vérifié ce phénomène chez de nombreux patients, il l'a dénommé **Réflexe Auriculo-Cardiaque (RAC)**. Avec l'expérience, il s'est orienté vers la possibilité de l'existence d'un phénomène plus général, qu'il a appelé sur les conseils du Professeur Pierre Magnin (Besançon), le **VAS : Vascular Autonomic Signal**. Autrement dit le signal vasculaire autonome.

Chez tout individu, lorsqu'on éclaire la peau avec un flash de lumière, le pouls radial devient plus dur. Ce phénomène perdure en général sur 3 pulsations et traduit une adaptation de l'organisme devant une nouvelle situation électromagnétique.

D'après les travaux de Paul Nogier, la stimulation cutanée pouvant déclencher le VAS peut-être mécanique ou lumineuse. L'auriculomédecine permet, grâce à la prise du pouls radial, d'évaluer les réponses de l'organisme devant des stimulations cutanées principalement. Les réactions sont bien connues et les examens standardisés. Aussi, est-il possible de détecter chez certains malades des réactions anormales qui devront être stimulées en général par auriculothérapie. L'auriculomédecine reste pour l'instant une technique marginale qui permet d'obtenir des résultats enviables. Elle est à la pointe de la recherche clinique et sera sans doute à l'origine des plus grandes découvertes de la physiologie de demain.

**La stimulation lumineuse intermittente de la peau peut déterminer un nombre de R.A.C. très différent selon la fréquence des impulsions lumineuses. C'est l'une des parties essentielles de l'auriculomédecine.**

#### LA PHOTONOTHÉRAPIE®

Nouvelle approche développée par le professeur Magnin, basée sur les découvertes de l'auriculomédecine : pouls de Nogier et photoperception.

Cela consiste en une projection de lumière basée sur la modulation de l'émission des photons via des disques colorés activés par un éclairage approprié : c'est la "Photonothérapie®".

Il s'agit d'une méthode authentique fondée sur la réorganisation énergétique et fonctionnelle de l'activité des électrons.

Elle associe des disques de couleurs et les fréquences de Nogier\*\*.

© Institut de photonomédecine - G. Baud

## PRÉSENTATION DES FRÉQUENCES DE NOGIER\*\*

Les organes du corps ont un métabolisme rythmé. Dans les années 70, Paul Nogier a trouvé la correspondance physiologique d'une gamme de fréquences avec les diverses parties du revêtement cutané en utilisant le R.A.C.

La peau contient plusieurs types de récepteurs sensoriels et de capteurs la rendant sensible à différents stimuli y compris aux stimulations électromagnétiques de différentes longueurs d'onde.

Par une stimulation cutanée à l'aide d'une lumière émise par une diode, avec des réglages hertz par hertz, il a découvert que certaines zones du pavillon auriculaire et du corps réagissent de manière identique à des fréquences particulières :

- 
- A 2,28 Hz, Orange 21**, aire basale, représente l'anabolisme
    - Stimulation du travail cellulaire
    - Action anti-inflammatoire
    - Action anti-oedemateuse
  - B 4,56 Hz, Rouge 25**, aire de la nutrition et de l'assimilation (métabolisme)
    - Stimulation des fonctions nutritives, des échanges intercellulaires, de la cohésion cellulaire et des phénomènes immunitaires
    - Action anti-allergique
  - C 9,12 Hz, Jaune 3**, aire cinétique, représente le mouvement. Stimulation des fonctions :
    - de locomotion
    - de la contraction musculaire
    - liées à l'agonisme et à l'antagonisme
    - liées à la sécrétion de Dopamine
  - D 18,25 Hz, Rouge 24**, aire associative, représente la liaison entre les côtés droit et gauche du corps.
    - Stimulation des fibres inter-hémisphériques, entraînant une stimulation des fonctions liées à la symétrie et à la latéralité.
    - Action : motricité, marche, posture
    - Action : langage, humeur, concentration, mémoire, repères espace/temps
  - E 36,50 Hz, Bleu 44**, aire de distribution, représente la transmission de l'influx entre le cortex et le soma
    - Stimulation de la moelle épinière
    - Action antalgique
  - F 73 Hz, Bleu 98**, aire sous-corticale, représente l'organisation instinctive.
    - Stimulation des noyaux gris centraux
    - Action cicatrisante, antidépressive
    - Régulation de l'hypothalamus et de l'appétit
  - G 146 Hz, Magenta 30**, aire corticale, représente l'organisation mentale.
    - Stimulation du cortex cérébral
    - Maladies psychosomatiques
    - Douleurs chroniques
    - Epilepsie

À partir des propriétés de la peau et des caractéristiques de la lumière induisant le phénomène de photo-perception cutanée, Sedatelec a conçu des dispositifs permettant de générer de la lumière blanche, colorée, pulsée ou non selon les fréquences de Nogier\*\*. Ces appareils sont utilisés en diagnostic ou en stimulation suivant les modèles et fonctionnent le plus souvent en relation avec la prise du pouls de Nogier.



# premio 40 Light

## LUMIÈRE ET COULEURS



Appareil de détection et de stimulation par les couleurs avec une lumière continue ou frérencée. Cet outil de très haute précision est idéal pour l'auriculomédecine, la médecine photonique et la chromothérapie. Dispositif médical classe I.

### POINTS FORTS

- Utilisation de toute la gamme de filtres et disques Sedatelec (>150 références)
- Sans fil et autonome pour une pratique aisée et sans contrainte
- Travail sur un point de Ø2 mm à une zone de Ø20 cm

### 112953 - PREMIO 40 LIGHT

36x35x8 cm - 1270 g - Malette de protection moussée

La malette contient :

- Le Premio 40 Light
- Un mode d'emploi
- Une batterie 900 mA protégée (112999 PREM-08)
- Un chargeur USB
- Un porte disque
- Un embout Ø2 mm
- Un embout Ø5 cm
- Mallette prédécoupée pour stocker jusqu'à 30 filtres et 5 disques (voir photo d'illustration contenant des options). NB: les filtres et disques couleurs sont optionnels.



Image non contractuelle.



#### OPTIONS POUR CET APPAREIL :

A	<b>112747 PREM-03</b> Support Premio
B	<b>113050 PREM-06</b> Rallonge pour batterie PREM-09
C	<b>113001 PREM-09</b> Batterie 2600 mA protégée 18650
D	<b>113074 PREM-07</b> Fibre optique à embout amovible
E	Filtre 1 couleur (Voir liste page 36)
F	Disque ELD (Voir liste page 38)

### UNE STIMULATION ADAPTÉE À VOTRE PRATIQUE



- Réglage de l'intensité basse (détection) sur 4 niveaux et haute (stimulation) sur 6 niveaux.
- Fréquences de Nogier\*\* de A à G et fréquence U en fréquences de base, avec possibilité d'utiliser les harmoniques supérieures et la fréquence L.
- Variation des fréquences de -30% à +30% par pas de 5%.
- Fonction balayage automatique de toutes les fréquences de Nogier à tous les pourcentages.
- Test de la latéralité avec la fonction battement (BF, HF, HF + BF)


### UNE STIMULATION EFFICACE

- Pilotage électronique sophistiqué
- Stabilité des réglages : microprocesseur 32 bits
- Une émission des fréquences avec une haute précision de 0.01%



### DIODE HIGH C.R.I.

#### LARGE SPECTRE ET ÉQUILIBRE CHROMATIQUE

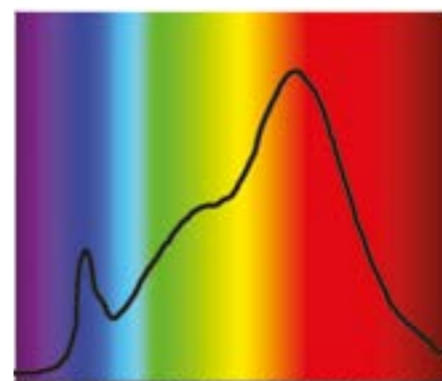

- Une diode high C.R.I. (Color Rendering Index) dernière génération avec un spectre de lumière blanche le plus proche de celui du soleil
- Très haute intensité d'éclairage réglable de 780 Lux à 51.500 Lux à 5cm
- Une seule diode, au lieu de trois diodes classiques RVB dont l'émission monochromatique en cloche ne permet pas d'atteindre la couverture spectrale désirée
- Un échauffement très limité de la source afin de maintenir une qualité constante quels que soient les filtres de gélatine utilisés





## STIMULATION THERMIQUE

### LA MOXIBUSTION EN TOUTE SÉCURITÉ

L'application thérapeutique de la chaleur est une pratique non invasive. Elle favorise la relaxation musculaire, diminue les raideurs, augmente localement la circulation sanguine, stimule le système immunitaire... Cette chaleur permet de lutter efficacement contre la douleur, et a une place toute particulière en Médecine Traditionnelle Chinoise, où elle est utilisée de façon quotidienne depuis des millénaires : on la nomme Moxibustion.

La stimulation par la chaleur issue de la combustion sans flamme de l'armoise est une pratique quotidienne, en Chine bien sûr, mais également au Japon. Elle fait actuellement l'objet de recherches scientifiques et cliniques importantes mettant en évidence les nombreux mécanismes physiologiques impliqués.

#### AU NIVEAU LOCAL :



La stimulation des thermorécepteurs va déclencher la libération de médiateurs (substance P, somatostatine, ...) qui vont agir immédiatement en provoquant une inflammation :

- **Une vasoconstriction initiale**, de très courte durée, probablement réflexe de la paroi vasculaire
- **Une vasodilatation** et une augmentation du flux sanguin, par stimulation antidromique de l'axone afférent
- **Une activation des mastocytes**, et du système immunitaire plus largement (augmentation de la population sanguine et de l'activité des globules blancs), sur une période assez longue (supérieure à 2 semaines)

### LES CARACTÉRISTIQUES DU SPECTRE DE L'ARMOISE EN COMBUSTION

Lorsque l'armoise est allumée avec un briquet ou un bâtonnet d'encens, elle va se consumer sans flamme, rougeoyante, et former des cendres qui, si elles ne sont pas éliminées (en tombant ou par un geste du praticien), vont ralentir la combustion et modifier son spectre d'émission.

**La chaleur émise l'est sous forme de radiations électromagnétiques, c'est-à-dire d'ondes porteuses d'énergie.**

**Le spectre d'émission est très proche de celui d'un corps noir.**

Un corps noir désigne un objet idéal dont le spectre électromagnétique –c'est-à-dire la répartition de la quantité d'énergie en fonction de la longueur d'onde ne dépend que de sa température.

Cette courbe a une forme spécifique, continue, avec un sommet correspondant à la longueur d'onde apportant le plus d'énergie, et une pente plus ou moins raide pour les longueurs d'ondes inférieures et supérieures.

## L'ARMOISE, CHOISIE DEPUIS LONGTEMPS COMME SOURCE DE CHALEUR

### UNE CHALEUR DE QUALITÉ

Dans sa forme primitive, la moxibustion a sans doute utilisé des matériaux variés, tels que galets chauffés (l'utilisation des pierres chaudes est toujours d'actualité), tabac, coton, soufre, aconit... Mais l'armoise a été retenue depuis très longtemps, pour la qualité de chaleur que procure la combustion de cette herbe séchée, puis réduite en «velours» avant d'être utilisée telle que ou roulée en cône, rouleau...

Elle a même donné son nom à la pratique hors de Chine, puisque le nom moxa vient du japonais mogusa, qui signifie armoise.




### UNE FUMÉE TRÈS ODORANTE

L'armoise est également utilisée en herboristerie, et son huile essentielle a des vertus bien connues mais également une toxicité non négligeable qui nécessite une utilisation professionnelle, réservée à des praticiens avertis.

L'inhalation de sa fumée peut se révéler toxique à long terme. D'autre part, comme tout corps qui se consume, elle génère des cendres qui, en tombant lors de la séance, peuvent créer des brûlures importantes sur la peau du patient.



### ARMOISE : UN SPECTRE DANS LES INFRAROUGES

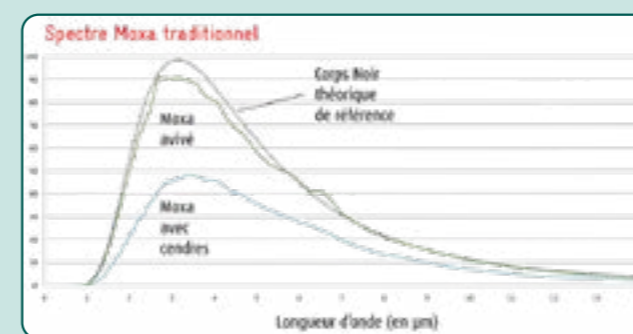

Une armoise en combustion présente un spectre d'émission très étendu, dont les longueurs d'ondes s'étalent à partir du rouge (dans le spectre visible) et les infrarouges courts, avec un pic situé dans les infrarouges moyens, et une forte proportion d'infrarouges longs. Si la combustion est activée, en soufflant dessus par exemple, la température de l'armoise monte à 850-900°C, et le pic du spectre se situe vers 2,6 µm, et la proportion d'infrarouges courts et moyens est importante.

Lorsque la combustion s'affaiblit (présence de cendres par exemple), la température de l'armoise chute aux alentours de 650°C, le pic est proche de 3 µm, décalant le spectre vers le bas (moins d'énergie transmise) et vers les infrarouges longs.

**La répartition des longueurs d'ondes sur une gamme aussi large est une caractéristique fondamentale de l'armoise, et explique en grande partie son efficacité, par son adéquation aux récepteurs physiologiques de l'organisme, thermo-et photo-récepteurs.**

Il ne suffit pas en effet d'apporter de l'énergie calorifique, il faut que cette chaleur puisse être absorbée, assimilée et cela dépend naturellement de la fenêtre de sensibilité électromagnétique des récepteurs. De plus, il ne faut pas saturer les thermorécepteurs cutanés, sensibles à la température externe et qui, si l'on dépasse leur seuil de tolérance, vont conduire le patient à un réflexe de retrait par douleur, limitant le temps d'application

# premio 10 moxa

## STIMULATION THERMIQUE



Innovant, le Premio 10 Moxa est le 1er moxateur électrique spécialement étudié pour assurer la même efficacité que la moxibustion traditionnelle. Elle favorise la relaxation musculaire, diminue les raideurs, augmente localement la circulation sanguine, stimule le système immunitaire... Cette chaleur permet de lutter efficacement contre la douleur.

Dispositif médical classe IIa.

### POINTS FORTS

- Emetteur IR avec des caractéristiques de spectre d'émission identique à celles de l'Armoise en combustion
- Mise en oeuvre très facile et très rapide
- Utilisable en milieu hospitalier (pas de fumée, pas d'odeur)
- Utilisable avec batterie portable grâce à sa prise USB

### 111237 - PREMIO 10 MOXA

26x20x7 cm - 450 g - Emballage cartonné


Le carton contient:

- Le Premio 10 Moxa électrique
- Un mode d'emploi
- Une alimentation électrique universelle / USB
- Un concentrateur (111848 PREM10-01)



#### OPTIONS POUR CET APPAREIL :

A	<b>112747 PREM-03</b> Support Premio
---	--------------------------------------

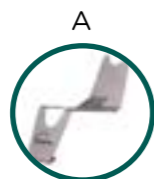

## UNE STIMULATION EFFICACE

### EN ACUPUNCTURE



des gestes familiers pour des résultats connus

### EN AURICULOTHÉRAPIE



une nouvelle technique de stimulation précise en quelques secondes

### EN THÉRAPIE LOCALE



une application précise, sûre, efficace

### L'EFFET «AIGUILLE THERMIQUE»



fulgurante chaleur pénétrante avec le concentrateur; en ciblant sur un point précis en quelques secondes

## OUBLIEZ LES CONTRAINTES DU MOXA :

- pas de fumées toxiques
- pas d'odeurs qui imprègnent l'environnement,
- pas d'allumage et d'extinction difficile,
- pas de cendres qui brûlent ou refroidissent le moxa.




## LE SEUL APPAREIL « ARMOISE LIKE »

L'émetteur IR spécialement développé pour le Premio 10 Moxa a des caractéristiques de spectre d'émission se calquant sur celles de l'Armoise en combustion aussi bien en termes de largeur de spectre, que de répartition entre les infrarouges courts, moyens et longs.

Ceux-ci assurent une mobilisation des récepteurs physiologiques, quelles que soient leur nature et leur profondeur, équivalente aux moxas traditionnels.

C'est en effet la répartition des longueurs d'ondes sur une large gamme qui explique en grande partie son efficacité, par son adéquation aux thermo-et photo-récepteurs physiologiques de l'organisme.

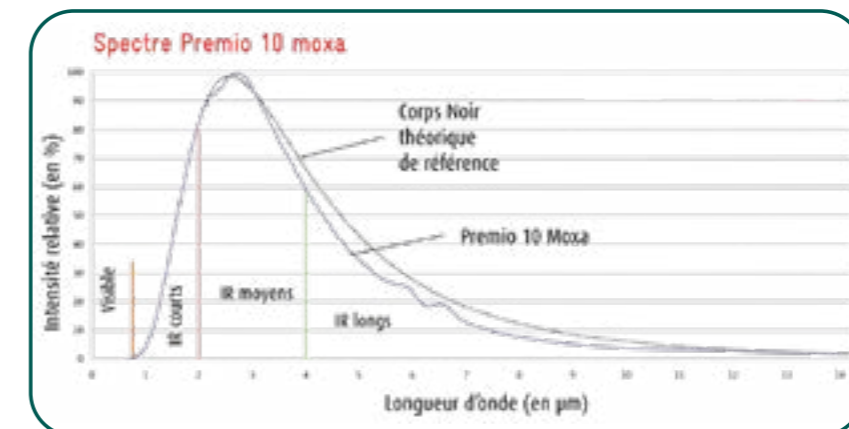



## INSTRUMENTS ET MATÉRIELS DIDACTIQUES



Les produits suivants **ne sont pas soumis au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux**. Que ce soit pour les formations ou pour votre pratique au quotidien Sedatelec propose des instruments de haute qualité, entièrement fabriqués en France.

### PALPEURS À PRESSION

Ces instruments Sedatelec sont indispensables pour rechercher les points douloureux sur le pavillon de l'oreille. 4 intensités de pression en fonction de la résistance souhaitée.



<b>103609 - PAL 130 - PALPEUR 130G NOIR</b>		
<b>103304 - PAL 250 - PALPEUR 250G BLEU</b>		
<b>103610 - PAL 400 - PALPEUR 400G ORANGE</b>		
<b>103611 - PAL 650 - PALPEUR 650G BEIGE</b>		
14.5x1x1 cm	25g	Sachet plastifié de 1 palpeur

### PALPEUR MULTI-PRESSIONS

Révolutionnaire par sa plage de mesure importante, (de 0 à environ 400 grammes) ergonomique, pratique et précis, l'EASYO 1 vous accompagnera durablement quelle que soit votre pratique. Des repères colorés vous aident pour évaluer précisément le niveau de pression, donc d'intensité ou de profondeur à laquelle vous provoquez une réaction.



<b>112353 - EASYO1 - PALPEUR MULTI-PRESSION</b>		
17x6x3 cm	30g	Sachet plastifié de 1 palpeur

### BÂTONNETS DE VERRE

En verre poli, ces bâtonnets offrent une excellente qualité de massage auriculaire, sans risque d'irritation de la peau, grâce à leurs embouts fins et lisses.

**BAT02**



**BAT03**



<b>103607 - BAT02 - BÂTONNETS DE VERRE</b>		
<b>113193 - BAT03 - BÂTONNETS DE VERRE BLEU ET ORANGE</b>		
13.5x1x2 cm	10g	Sachet plastifié de 2 bâtonnets

## OREILLE EN SILICONE MÉDICAL

**Reproduction très réaliste de l'oreille.** Utile pour montrer les points à vos patients ou à vos élèves. Excellente qualité permettant de multiples ponctures d'aiguilles sans détérioration de l'oreille.



<b>103350 - ORED - OREILLE DROITE SILICONE</b>		
<b>103349 - OREG - OREILLE GAUCHE SILICONE</b>		
8.5x5.5x4 cm	80g	Sachet plastifié de 1 oreille

## TAMPONS D'OREILLE (BOIS OU AUTO-ENCREUR)

Utiles lors de vos consultations, ils permettent de repérer les points traités. Deux modèles d'empreintes sont disponibles, avec ou sans la vue postérieure.

**TAMB**



**TAME**



<b>103179 - TAMB1 - TAMPON OREILLE BOIS N°1</b>		
<b>103602 - TAMB2 - TAMPON OREILLE BOIS N°2</b>		
11.5x6x5 cm	153g	Sachet plastifié de 1 tampon
<b>103603 - TAME1 - TAMPON OREILLE ENCREUR N°1</b>		
<b>103604 - TAME2 - TAMPON OREILLE ENCREUR N°2</b>		
11.5x6x5 cm	153g	Sachet plastifié de 1 tampon

**N°1**



**N°2**



## MISE À LA TERRE PATIENT


Utilisée pour écouler les charges électrostatiques corporelles vers la terre. Elle comporte une électrode amovible nettoyable à l'aide d'un chiffon. Pour plus de souplesse d'utilisation, possibilité d'approvisionner des électrodes supplémentaires. S'adapte aux prises EU ou US.



<b>112698 - DMAT - DISPOSITIF MISE À LA TERRE EU</b>		
<b>113095 - DMAT US - DISPOSITIF MISE À LA TERRE US</b>		
13.5x6x1.9 cm	100g	Sachet plastifié de 1 dispositif
<b>112804 - DMAT 01 - ELECTRODES DE MISE À LA TERRE</b>		
8x5x1 cm	30g	Sachet plastifié de 2 électrodes

## RAPPORTEUR ANTI-TABAC OU D'ANGLES 30°

**Rapporteur Anti-tabac**, plaque transparente possédant 7 sillons orientés pour le programme anti-tabac. **Rapporteur d'angles**, plaque transparente avec angles de 30° (géométrie de l'oreille).

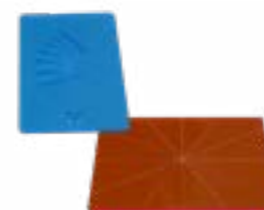

<b>103347 - RAPAT - RAPPORTEUR ANTI-TABAC</b>		
<b>103606 - RAP30 - RAPPORTEUR D'ANGLES 30°</b>		
14x11x5 cm	50g	Sachet plastifié de 1 rapporteur





## PCF : PROGRAMME COULEURS/FRÉQUENCES LEE

Le Programme Couleurs Fréquentiel, PCF LEE représente le kit de base d'utilisation des filtres en Auriculomédecine.



- Fréquence **A** 21 = Lee 020
- Fréquence **B** 25 = Lee 026 → Phase 1
- Fréquence **C** 3 = Lee 007
- Fréquence **D** 24 = Lee 024
- Fréquence **E** 44 = Lee 201 → Phase 3
- Fréquence **F** 98 = Lee 363
- Fréquence **G** 30 = Lee 128
- Fréquence **L** = 58 = Lee 088 → Phase 2

### 113291 PCF LEE - PROGRAMME COULEUR FRÉQUENTIEL LEE

20x6x18 cm	180g	Sachet plastifié de 8 filtres
------------	------	-------------------------------

## DISQUES POUR PREMIO 40



**112615- ELD-D3**  
Disque D3 :  
9/64/12/44A/24/31



**113073 - ELD-GIR**  
Disque couleur Rouge  
et Infra-rouge



**112616 - ELD-D4**  
Disque D4 :  
21/44/61/24/25/58



**112728 - ELD-PCF**  
Disque PCF LEE :  
L020 (A21) / L026 (B25)  
L007 (C3) / L024 (D24)  
L0201 (E44) / L636 (F98)  
L128 (G30)

### 112497 - ELD-DV - DISQUE VIERGE POUR COULEURS PERSONNALISÉES

5x8x0.5 cm	30g	Emballage sachets plastifiés individuels
------------	-----	--

Possibilité de faire réaliser vos propres disques, avec choix de couleurs à la demande, et quantité minimum pour écoles ou formateurs.

## FILTRES 2 COULEURS OU PLUS

Ces filtres permettent de tester 2 couleurs ou 2 effets de façon simultanée. Ils sont composés de 2 gélamines colorées superposées dans un même filtre. Nous pouvons également réaliser des compositions de couleurs spécifiques sur demande.

### FILTRES SUPERPOSÉS - 2 COULEURS



**107207 - FIL2S-3016** - Filtre 2 C Superposé 30/16\*

**103370 - FIL2S-3032** - Filtre 2 C Superposé 30/32\*

**112921 - FIL2S-33L299** - Filtre 2 C Superposé L141/L299 = 33/90

8.5x5.5x0.5 cm	30g	Sachet plastifié de 1 filtre
----------------	-----	------------------------------

\*Disponible jusqu'à épuisement

### FILTRES SUPERPOSÉS - 3 COULEURS



**107243- FIL3S-212544** - Filtre 3 C Superposé 21/25/44\*

**107244 - FIL3S-2165A58** - Filtre 3 C Superposé 21/65A/58\*

**107238 - FIL3S-254458** - Filtre 3 C Superposé 25/44/58 Lee

**109467 - FIL3S-255824** - Filtre 3 C Superposé 25/58/24\*

**107240 - FIL3S-305899** - Filtre 3 C Superposé 30/58/99 Lee

**103371 - FIL3S-442524** - Filtre 3 C Superposé 44/25/24\*

8.5x5.5x0.5 cm	30g	Sachet plastifié de 1 filtre
----------------	-----	------------------------------

\*Disponible jusqu'à épuisement

### FILTRES ÉTOILE - 3 COULEURS



**107245 - FIL3E-254458** - Filtre 3 C étoile 25/44/58 Lee

**107248 - FIL3E-2165A24** - Filtre 3 C étoile 21/65A/24\*

**107249 - FIL3E-245865A** - Filtre 3 C étoile 24/58/65A\*

**107668 - FIL3E-244458** - Filtre 3 C étoile 24/44/58

8.5x5.5x0.5 cm	30g	Sachet plastifié de 1 filtre
----------------	-----	------------------------------

\*Disponible jusqu'à épuisement

## FILTRES DIVERS



<b>103376</b> - FILOR - Filtre Or*
<b>103377</b> - FILAR - Filtre Argent*
<b>103378</b> - FILNB - Filtre Noir/Blanc
<b>103379</b> - FILNBPOL - Filtre Noir/Blanc polarisé
<b>103380</b> - FILMAG - Filtre magnétique
<b>103381</b> - FILMAGPOL - Filtre magnétique polarisé
<b>110219</b> - FILMAGN/S - Filtre magnétique nord-sud
<b>110221</b> - FILMAGN/SPOL - Filtre magnétique nord-sud polarisé
<b>103384</b> - FILPOLS - Filtre polaroïd simple
<b>103382</b> - FILPOLC - Filtre polaroïd croisé
<b>103387</b> - FILARG - Filtre argile
<b>103400</b> - FILETO4 - Filtre espace-temps (lot de 4)
<b>103407</b> - POL612 - Plaque polaroïd 6 x 12 cm
<b>103408</b> - POL1015 - Plaque polaroïd 10 x 15 cm
<b>113336</b> - FILCIR4GRDR - Filtre circulaire 4Dr/Gr
8.5x5.5x0.5 cm   30g   Sachet plastifié de 1 filtre

## ANNEAUX-TEST ANOTEST®

Ensemble composé de 10 disques transparents mâles et 10 disques femelles, 10 pastilles absorbantes sans cendre, et 10 anneaux caoutchouc, neutres pour réaliser vos propres filtres (ATEST10). Possibilité d'acheter séparément les anneaux caoutchouc (ATEST-01), les disques mâles / femelles (ATEST-02).



<b>107472 - ATEST10 - 10 ANNEAUX-TEST POUR FILTRES</b>
15x10x3 cm   150g   Sachet plastifié de 10 Anneaux complets
<b>103507</b> - ATEST-01 - 10 Anneaux caoutchouc vides
<b>103255</b> - ATEST-02 - 10 Disques transparents Males/Femelles

## LUNETTES SUPPORTS FILTRES

Lunettes spéciales permettant d'insérer nos filtres couleurs. Les patients peuvent ainsi regarder les couleurs choisies par le thérapeute.



Image non contractuelle.

<b>113388 - LUMAL - LUNETTES SUPPORTS FILTRES</b>
19x8x6.5 cm   100g   Boîte individuelle avec un étui

## BOITE DE RANGEMENT FILTRES

Cette boîte de rangement vous permettra de classer jusqu'à 20 filtres.




Image non contractuelle.

### 103395 - ATEST-03 - BOÎTE DE RANGEMENT (20 FILTRES)

25x2x2 cm	180g	Emballage plastifié unitaire
-----------	------	------------------------------

## GAMME EASYO

Détecteurs ergonomiques composés de différents matériaux.

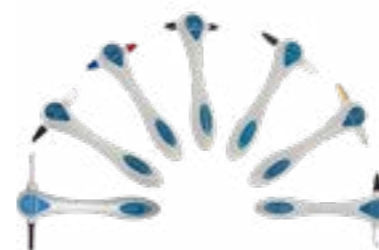

<b>112870 - EASYO2</b> - Détecteur noir-blanc long
<b>112354 - EASYO3</b> - Détecteur noir-blanc court
<b>112355 - EASYO4</b> - Détecteur nord-sud
<b>112356 - EASYO5</b> - Détecteur 3V
<b>112357 - EASYO6</b> - Détecteur Bahr 3V noir-blanc
<b>112358 - EASYO7</b> - Détecteur or-argent
<b>113382 - EASYO8</b> - Détecteur Bahr triple

13.5x6x1.9 cm	100g	Sachet plastifié de 1 détecteur
---------------	------	---------------------------------

## STYLETTS ENDO-NASAL

Utilisé en sympatothérapie ou nasothérapie, ils permettent de stimuler de façon douce les points réflexes de la muqueuse nasale. Il existe en version souple ou semi-rigide.



### 103302 - STYSOU - STYLET SOUPLE

### 103303 - STYSER - STYLET SEMI-RIGIDE

20x0.5x0.5 cm	50g	Emballage plastifié unitaire
---------------	-----	------------------------------

## ECOUVILLONS

Embout coton et manche bois, conditionnés en boîte de 200 unités et stérilisés individuellement.



### 106708 - ECOU200 - BOÎTE DE 200 ECOUVILLONS COTON

20x1.5x7.5 cm	150g	Emballage carton
---------------	------	------------------





## PLANCHES

EN FRANÇAIS	
<b>113087 - PLFB02-FR</b>	F. BAHR - Nouvelle Acupuncture de l'Oreille plastifiée (60x80)
<b>111752 PLCERS01-FR</b>	CERS TA Nasosymphathicothérapie - Somatotopie interne
<b>B 113285 PLHRLEH01-FR</b>	H. R. LEHNER Carte d'auriculothérapie - Selon P. Nogier et R. Bourdiol 60x85cm
<b>D 113325 PLHRLEH02-FR</b>	H.R.LEHNER Carte d'Acupuncture Auriculaire pour les chiens et les chevaux-Ed. FUECHTENBUSCH -60x85cm
<b>109392 PLJVBA0217-FR</b>	J. V. BAARLE 21x30 Iridologie - FR - plastifiée
<b>109364 PLJVBA021-FR</b>	J. V. BAARLE 21x30 Méridiens - FR - plastifiée
<b>109366 PLJVBA022-FR</b>	J. V. BAARLE 21x30 Points Acupuncture - Alarme - MU - JU - FR - plastifiée
<b>109378 PLJVBA028-FR</b>	J. V. BAARLE 21x30 Chakras - FR - plastifiée
<b>109382 PLJVBA0210-FR</b>	J. V. BAARLE 21x30 Zones Réflexes Main - FR - plastifiée
<b>109386 PLJVBA0212-FR</b>	J. V. BAARLE 21x30 Zones Réflexes Main et Pied - FR - plastifiée
<b>109394 PLJVBA031-FR</b>	J. V. BAARLE 42x60 Méridiens - FR - plastifiée
<b>A 103608 PLPNRN01-FR</b>	P.F.M NOGIER présenté par R. NOGIER Cartographie de l'oreille 40x60 Ed.SEDATELEC
<b>A 112669 PLPNRN02-FR</b>	P.F.M NOGIER présenté par R. NOGIER Cartographie de l'oreille 20X30 Ed. Sedatelec

EN ANGLAIS	
<b>D 112997 PLFB01-AN</b>	F. BAHR - Chart of the New Ear Acupuncture (60x80)
<b>106892 PLBFNS02-AN</b>	B.L. FRANK / N.E. SOLIMAN Auricular Therapy Reflex Chart - 21x27cm
<b>106891 PLBFNS01-AN</b>	B.L. FRANK / N.E. SOLIMAN Auricular Therapy Reflex Chart 60x90cm
<b>109458 PLBFNS03-AN</b>	B.L. FRANK / N.E. SOLIMAN Hand Acupuncture Reflex Chart 28x43 cm
<b>107383 PLBEIJ01-AN</b>	Beijing Acupuncture Institut, Official localisation of acupuncture points: 3 charts 1m x 0,80
<b>B 113284 PLHRLEH01-AN</b>	H. R. LEHNER Map of auriculotherapy - According to P. Nogier and R. Bourdiol 60x85cm
<b>D 113323 PLHRLEH02-AN</b>	H. R. LEHNER Map of ear acupuncture for Dogs and Horses - FUECHTENBUSCH Publishing - 60x85cm
<b>A 107378 PLPNRN01-AN</b>	P.F.M NOGIER présenté par R. NOGIER Ear chart 40x60 Ed.Sedatelec
<b>A 112670 PLPNRN02-AN</b>	P.F.M NOGIER présenté par R. NOGIER Ear chart 20X30 Ed.Sedatelec
<b>106751 PLTOLE01-AN</b>	T. OLESON Ear reflex points chart (en anglais) 1 planche / 1 chart 75 x 120 cm Edit. HCA - USA

AUTRES LANGUES	
<b>109555 PLBFNS02-AL</b>	B.L. FRANK / N.E. SOLIMAN Reflexzonen für Ohrakupunktur - 21x27cm
<b>B 113322 PLHRLEH01-PT</b>	H. R. LEHNER Cartografia de Auriculoterapia - Segundo P. Nogier e R. Bourdiol 60x85cm
<b>A 107379 PLPNRN01-AL</b>	P.F.M NOGIER présenté par R. NOGIER Darstellung des Ohres 40x60 Ed.Sedatelec
<b>A 107381 PLPNRN01-ES</b>	P.F.M NOGIER présenté par R. NOGIER Cartografia de la oreja 40x60 Ed. Sedatemec
<b>A 112672 PLPNRN02-ES</b>	P.F.M NOGIER présenté par R. NOGIER Cartografia de la oreja 20X30 Ed. Sedatelec
<b>A 107380 PLPNRN01-IT</b>	P.F.M NOGIER présenté par R. NOGIER Mappa auricolare 40x60 Ed. Sedatelec
<b>A 112671 PLPNRN02-IT</b>	P.F.M NOGIER présenté par R. NOGIER Mappa auricolare 20X30 Ed. Sedatelec
<b>A 107382 PLPNRN01-HO</b>	P.F.M NOGIER présenté par R. NOGIER Oorkaart 40x60 Ed.Sedatelec

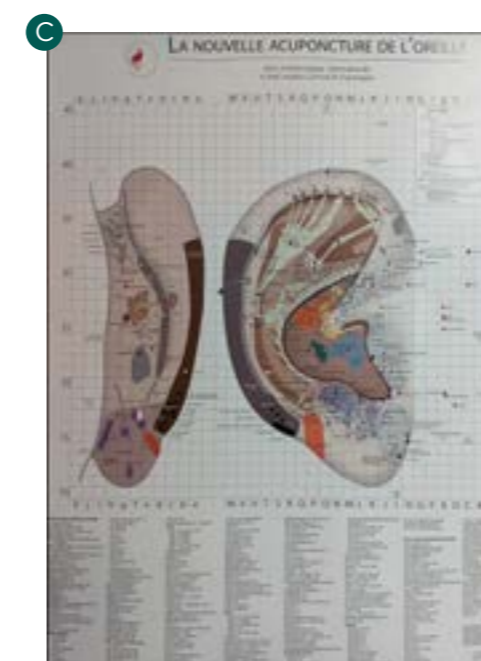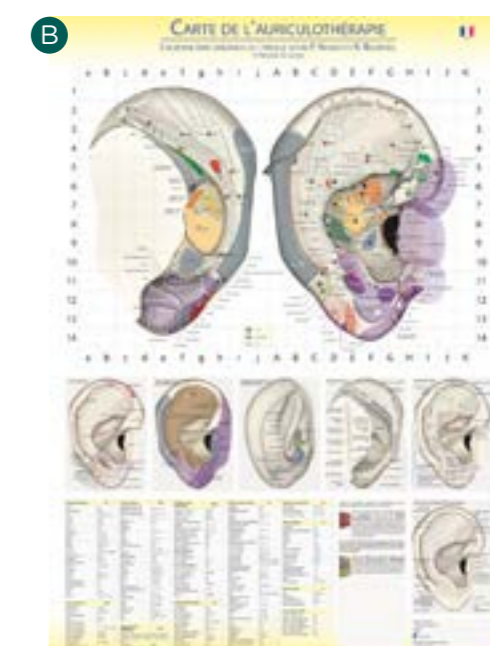



## LIVRES

AURICULOTHÉRAPIE ET AURICULOMÉDECINE (EN FRANÇAIS)	
<b>C</b> 113136 LIALEN03-FR	A.LENTZ Auriculomédecine rénovée et simplifiée 2ème édition
111622 LICTER01-FR	C. TERRAL Douleur et Acupuncture Edit. Sauramps medical
113144 LICVUL02-FR	C. VULLIEZ Auriculothérapie et pathologies bucco-dentaires Ed. Sauramps medical
106881 LICVUL01-FR	Ch. VULLIEZ Auriculothérapie appliquée à l'art dentaire Ed. Sauramps medical
113337 LIFBFR02-FR	F. R. BAHR Blessures psychiques - Traumatismes psychiques
112969 LIFBFR01-FR	F. R. BAHR La nouvelle acupuncture de l'oreille
112399 LICACOLL01-FR	ICAMAR Actes du premier colloque international d'auriculothérapie, auriculomédecine et médecine ph
112708 LICACOLL02-FR	ICAMAR Actes des rencontres Besançon 2014 d'Auriculo, médecine photonique et craniopuncture
112709 LICACOLL03-FR	ICAMAR Actes des rencontres Barcelone 2015 d'Auriculo, médecine photonique
112026 LICAMAR01-FR	ICAMAR French Review 2010 - 2011 237p.
112400 LICAMAR02-FR	ICAMAR Livre II en français années 2011-2012 n°4-5-6
112707 LICAMAR03-FR	ICAMAR Livre III en français années 2012-2013 n°7-8-9
112880 LICAMAR04-FR	ICAMAR Livre IV ANNEES 2013-2015
113118 LICAMAR05-FR	ICAMAR N°22
112943 LILCOU-01-FR	L. COUTURE L'acupuncture sur Oreille et Parkinson
112945 LILCOU-02-FR	L. COUTURE La Latéralité et L'auriculomédecine
<b>A</b> 106806 LIPNOG01-FR	P. NOGIER Introduction pratique à l'Auriculothérapie 169p. Ed. Satas
106815 LIPNOG04-FR	P. NOGIER L'homme dans l'oreille 256p. Ed. Maissonneuve
106818 LIPNOG07-FR	P. NOGIER ET AL Revue auriculomédecine 1975 à 1984 Ed. Maissonneuve
106864 LIRNOG04-FR	R. NOGIER Auriculothérapie 1er degré Ed. Sauramps medical
110812 LIRNOG06-FR	R. NOGIER Auriculothérapie 2ème degré 80p. Ed. Sauramps medical
113305 LIRNOG10-FR	R. NOGIER Le RAC - Réflexe Autonome Circulatoire
110098 LIRSAN03-FR	R. SANANES Guide de l'Arthrose Homéo Ed. Resurgence
<b>D</b> 112879 LIYROU06-FR	Y. ROUXEVILLE Les clés de l'auriculothérapie Edit. Satas
113143 LIYROU07-FR	Y. ROUXEVILLE Livre blanc de l'auriculothérapie en 2020 240p. Ed. Sauramps medical

AURICULOTHÉRAPIE ET AURICULOMÉDECINE (EN ANGLAIS)	
<b>C</b> 113134 LIALEN03-EN	A.LENTZ Auriculomedecine updated and simplified 2nd edition
<b>E</b> 113123 LIJHAF01-AN	J. HOWARD & A.FUECHTENBUSCH Auriculotherapy - The Atlas Based on the Originals by P. Nogier
111335 LIKLAN01-AN	K. LANDGREN Ear Acupuncture - Practical Guide 230 p. Edit. Elsevier
111624 LIMROM01-AN	M. ROMOLI Auricular Acupuncture Diagnosis Edit. Churchill Livinstone

AURICULOTHÉRAPIE ET AURICULOMÉDECINE (EN ANGLAIS)	
111334 LIRNOG07-AN	R. NOGIER Auriculotherapy Edit. Thieme
<b>B</b> 112944 LILCOU-01-AN	L. COUTURE Ear Acupuncture and Parkinson
112946 LILCOU-02-AN	L. COUTURE Laterality and Auriculomedecine

AURICULOTHÉRAPIE ET AURICULOMÉDECINE (AUTRES LANGUES)	
<b>C</b> 113158 LIALEN03-ES	A.LENTZ Auriculomedecina renovada y simplificada 2ème édition
106804 LIGLEM01-LL	ANNALES DU GLEM 1995 à 2007 115p.
<b>F</b> 113319 LIJPRI01-ES	J. PRIETO DE MARÍA Terapia Auricular - Mandala Ediciones
109354 LIPNOG08-LL	P. NOGIER Correspondances fréquentielles (4 langues) (30 p.) Edit. Sauramps medical
<b>A</b> 106809 LIPNOG01-IT	P. NOGIER Introduzione pratica all'auricoloterapia (168 p.) Edit. LIBRERIA CORTINA - Torino
<b>A</b> 106808 LIPNOG01-AL	P. NOGIER Praktische Einführung in die Aurikulotherapie 163 p. Edit. Satas

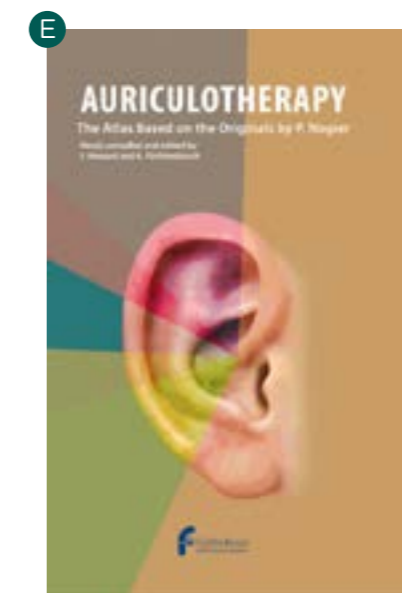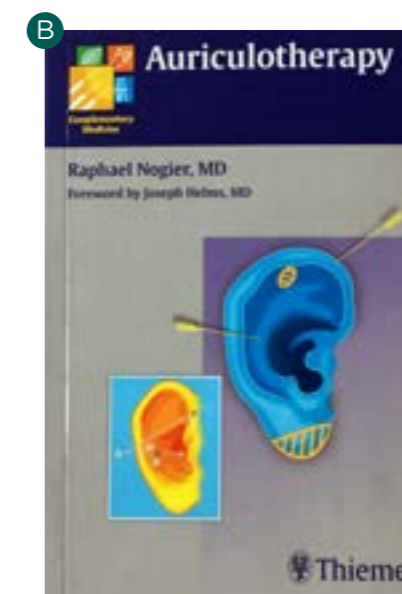



## LIVRES

### ACUPUNCTURE (EN ANGLAIS)

A 110299 LIMPIQ01-AN	M. PIQUEMAL Advance in Acupuncture with bioelectricity 122p. Edit. Y Arte SA
----------------------	--

### ACUPUNCTURE (EN FRANÇAIS)

112313 LIYROU05-FR	Y. ROUXEVILLE Abrégé de physiologie à l'usage des acupuncteurs et des réflexothérapeutes (232p.) Edit. Springer
--------------------	---

### LASER (EN ANGLAIS)





109352 LILHJT01-AN	L. HODE, J. TUNER The LASER Therapy Handbook (590 p.) Edit. Prima Books
B 113149 LIPBEC01-EN	P. BECU Laser Biostimulation : 12 questions to ask yourself. 118 p
C 113463 LIVKF01-AN	V. KREISEL and A. FUECHTENBUSCH "Laser Acupuncture and Laser Ear acupuncture"
D 113455 LIVAFWB01-AN	A. FUECHTENBUSCH and Wolfgang Bringmann Laser Therapy and Laser Puncture - Treatment tables

### LASER (EN FRANÇAIS)

E 106882 LICVRN01-FR	Ch. VULLIEZ-R. NOGIER Précis de laserthérapie en odonto-stomatologie Edit. Jollois
B 113148 LILHJT01-FR	P. BECU La Biostimulation Laser : Les 12 questions à se poser. 118 p

### AUTRES



113163 LICBRE01-FR	C. BRETIN DIEN CHAN Réflexologie Faciale Leduc pratique, 501 p
113058 LIDHEN03-FR	D. HENRY Guide thérapeutique en Médecine des Ventouses Edit. Guy Tredaniel
112457 LIHHECKER-AN	H-U HECKER. K LIEBCHEN - Acupressure Taping Edit. Healing Arts Press
110989 LIJCJL01-FR	J.R. CHENARD, J. LI Maux de dos Med. chinoise Med. moderne Edit. Maloine
110997 LIMDOS01-FR	M. DOSCH Atlas des techniques de neuralthérapie Edit. Haug
110998 LIMDOS02-FR	M. DOSCH Introduction aux techniques de neuralthérapie Edit. Haug
111623 LIPLEU01-FR	P.F. de LEUZE De l'aiguille au coeur de mes patients Edit. Les 2 encres
112972 LIPMPV02-FR	P. MAGNIN P. VIDAL P. BECU De la Chromothérapie à la médecine photonique

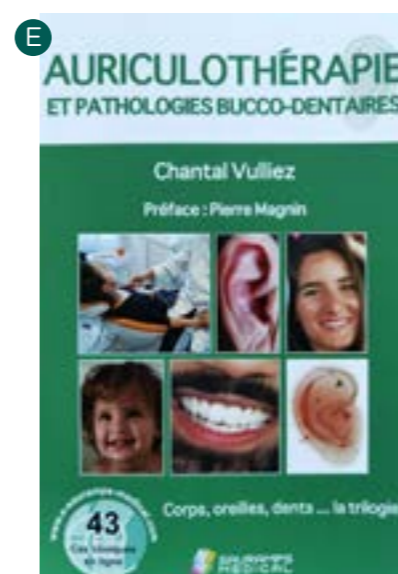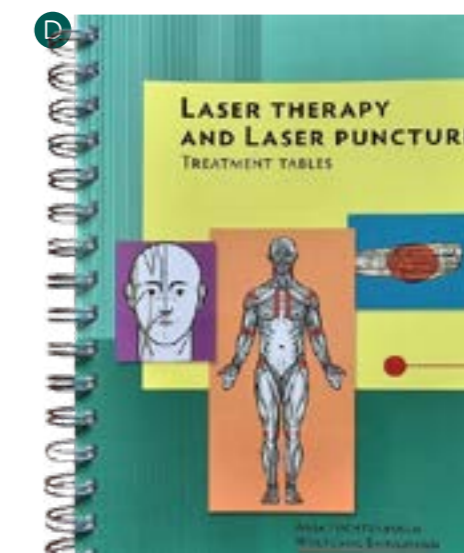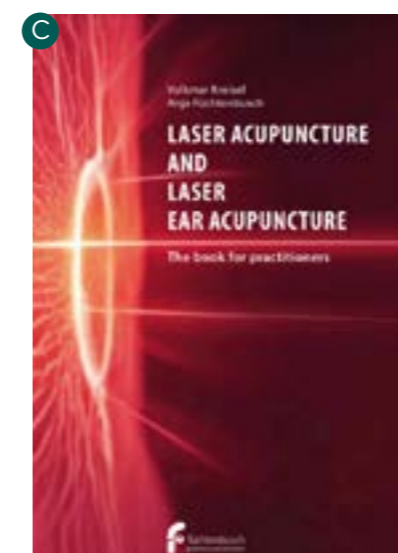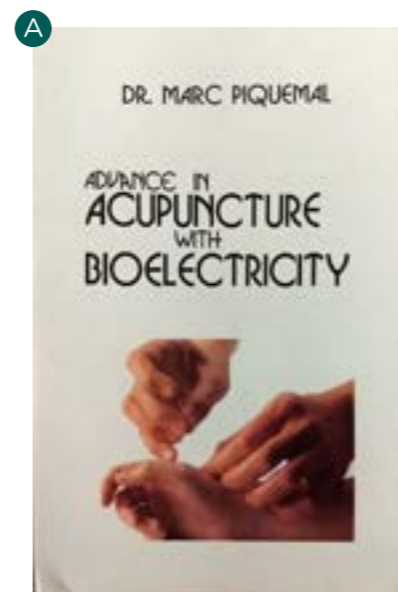

## LIVRES

### VÉTÉRINAIRE (EN ANGLAIS)

A 113461 LIAFPRO1-AN	A. FUECHTENBUSCH and Peter Rosin "Laser Therapy and Acupuncture on Horses"
B 113462 LIAFPRO2-AN	A. FUECHTENBUSCH and Peter Rosin "Laser Therapy and Laser Puncture in Dogs and Cats"

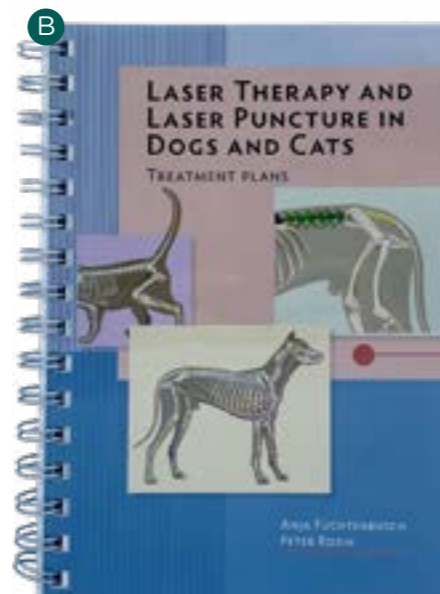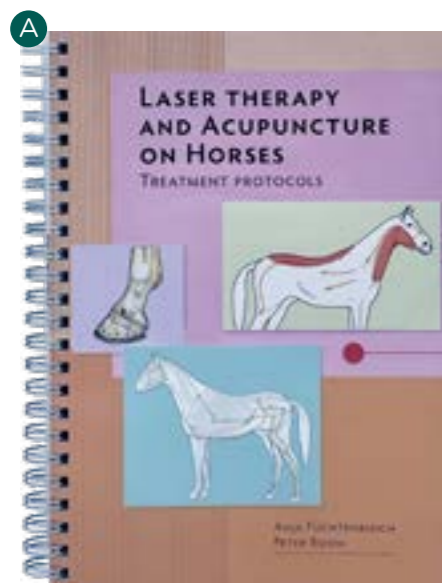

DEPUIS LA R&D JUSQU'À LA FABRICATION, EN PASSANT PAR LA CONCEPTION ET LE DÉVELOPPEMENT, TOUT EST « MADE IN FRANCE ».

### LA FABRICATION DES AIGUILLES

Au cœur de Sedatelec se trouvent les salles propres de fabrication des aiguilles ASP®.

Équipé de machines modernes permettant de produire des pièces avec des **précisions au centième de millimètre**, ce process automatisé réduit les manipulations inutiles. Les conditions de maîtrise de l'environnement, imposées par les normes, assurent une qualité de propreté optimale des aiguilles avant leur stérilisation aux rayons gamma. De plus, toutes les aiguilles subissent un **contrôle final à 100%** par caméra optique avant la mise en boîte.



### L'ATELIER DE FABRICATION ÉLECTRONIQUE

Depuis la R&D jusqu'à la fabrication, en passant par la conception et le développement, tout est « **Made in France** ». La gestion de production par informatique garantit une traçabilité parfaite de toutes les pièces.

Chaque étape du montage manuel par des professionnels expérimentés, est contrôlée en continu. Du matériel électronique de dernière génération teste chaque appareil avant expédition, assurant ainsi une qualité optimale.





# INDEX

Adaptateur Premio - EU	20
Adaptateur Premio - UK	20
Adaptateur Premio - US	20
Agistim Duo	16
Anneaux caoutchouc pour AT (1X10)	40
Anneaux-test pour filtres	40
ASP® Original Classic	8
ASP® Original Gold	8
ASP® Original Titanium	8
ASP® Perma	11
Batônnetts verre	34
Boîte de rangement filtres	41
Concentrateur Premio 10 Moxa	32
Connecteur aiguille Agistim Duo	16
Détecteur 3 volts - EASYO 5	41
Détecteur noir-blanc court - EASYO 3	41
Détecteur noir-blanc long - EASYO 2	41
Détecteur nord-sud - EASYO 4	41
Détecteur or-argent - EASYO 7	41
Détecteur triple Bahr - EASYO 8	41
Disque D3 - Premio 40	38
Disque D4 - Premio 40	38
Disque GIR - Premio 40	38
Disque PCF - Premio 40	38
Disque Vierge - Premio 40	38
Disque transparents pour AT	40
Ecouvillon	41
Electrodes DMAT	35
Embout vétérinaire Premio 32 veto	24
Filtre 1 couleur	37
Filtre L 1 couleur	36
Filtre 2 couleurs superposées	39
Filtre 3 couleurs étoile	39
Filtre 3 couleurs superposées	39
Filtre argent	40
Filtre argile	40
Filtre espace temps	40
Filtre magnétique	40
Filtre magnétique nord/sud	40
Filtre magnétique nord/sud polarisé	40
Filtre magnétique polarisé	40
Filtre noir/blanc	40

Filtre noir/blanc polarisé	40
Filtre or	40
Filtre polaroid croisé	40
Filtre polaroid simple	40
Four needle module	16
Holster pour Premio laser	20
Kit lypolise Agistim Duo	16
Livres	44
Lunettes supports pour filtres	40
Mise à la terre patient	35
Oreille caoutchouc droit	35
Oreille caoutchouc gauche	35
Palpeur à pression 130G	34
Palpeur à pression 250G	34
Palpeur à pression 400G	34
Palpeur à pression 650G	34
Palpeur multiniveaux	34
Pastilles adhésives ASP	10
Planches	42
Premio 10 Moxa	32
Premio 20 D	14
Premio 20 DT	14
Premio 20 DT VET	14
Premio 30 Evo Laser Duo	20
Premio 32 Evo Laser A-G program	23
Premio 32 D Laser	25
Premio 32 V Evo Laser	24
Premio 40 Light	28
Programme couleur fréquentiel LEE	38
Rapporteur angle 30°	35
Rapporteur anti-tabac	35
Styl module	16
Styilet semi-rigide	41
Styilet souple	41
Support Premio	20
Tampon d'oreille bois	35
Tampons d'oreille encreur	35
Test pour Agistim Duo	16

## CONDITIONS DE VENTE

Ce tarif s'applique aux distributeurs de dispositifs médicaux qui ont un accord avec Sedatelec, incluant la traçabilité des produits vendus. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, et sont valables jusqu'au 31/12/2022 pour tous pays reconnaissant le marquage CE, et le Canada. Seuls l'ASP® Original, les instruments auriculo (palpeurs, oreilles ...), le Premio 10 moxa et le Premio 40 sont disponibles aux États-Unis. Seuls l'ASP® Original et le Premio 10 moxa sont disponibles en Australie.

Les prix sont hors transport, et peuvent être sujet à des minimas en quantité. Voir avec votre interlocuteur.

## GARANTIE

Nos appareils sont garantis 2 ans pièces et main d'œuvre contre tout vice de fabrication, à l'exception des pièces d'usures (câbles, capteurs, piles...) et pour une utilisation conforme au mode d'emploi. Ne sont pas couverts, notamment les bris dus à des chutes ou écrasements, les immersions ou renversement de liquides, ainsi que les coulures des piles dans les boîtiers. Les petits instruments sont garantis 1 an.

## RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les marchandises livrées restent la propriété de Sedatelec jusqu'à leur complet paiement.

## CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

En cas de contestation, le Tribunal de commerce de Lyon est seul compétent.

## ACHEMINEMENT

- Europe : Franco de port pour les envois supérieurs à 4 000 € HT, sauf si expédiés en express.
- Grand export : Facturation des frais réels.

## MODES DE RÉGLEMENT

Les commandes se règlent avant expédition / Les devis et factures proforma sont établis sur demande.

### Virement bancaire :

<b>BNP PARIBAS</b> Agence AER Lyon Metropole E <b>N° de compte:</b> 00024094070 <b>Banque:</b> 30004   <b>Guichet:</b> 00694   <b>Clé :</b> 79 <b>IBAN:</b> FR76 3000 4006 9400 0240 9407 079 <b>BIC:</b> BNPAFRPPXXX	<b>HSBC</b> BBC LIVE <b>N° de compte:</b> 01782009895 <b>Banque:</b> 30056   <b>Guichet:</b> 00178   <b>Clé :</b> 22 <b>IBAN:</b> FR76 3005 6001 7801 7820 0989 522 <b>BIC:</b> CCFRFRPPXXX
--	--

- Cartes bancaires :   
- Chèque bancaire
- Contre remise de documents (coordonnées bancaires à fournir)

Le règlement sera effectué sans escompte suivant les termes de notre tarif. Conformément à la législation en vigueur au 1er janvier 2013, tout retard de paiement entraînera d'office une indemnité exigible immédiatement et calculée sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € (Article L 446-6 du Code du Commerce).

En cas d'impayé, le vendeur se réserve le droit de suspendre ou d'annuler les commandes en cours sans préjudice de tout autre recours, et toutes les créances à terme deviendront immédiatement exigibles.

## SUIVI CLINIQUE

Dans le cadre du nouveau Règlement Européen des Dispositifs Médicaux, nous devons renforcer le suivi et l'analyse de nos produits après leur commercialisation. C'est une superbe opportunité pour mieux faire connaître les méthodes thérapeutiques dites « non conventionnelles », en en démontrant l'efficacité et la totale sécurité.

Pour cela, nous avons besoin de votre aide pour enrichir nos dossiers cliniques.

Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce(s) questionnaire(s) indispensable(s) à la poursuite de notre activité.

Soyez convaincu que nous poursuivons notre engagement de toujours vous fournir le meilleur.



Chemin des Mûriers • F-69540 Irigny (Lyon) France  
Tél : +33 (0) 472 663 322 • Fax : +33 (0) 478 508 903 3  
[contact@sedatelec.com](mailto:contact@sedatelec.com) • [www.sedatelec.com](http://www.sedatelec.com)

### SUIVEZ NOUS :







Chemin des Mûriers • F-69540 Irigny (Lyon) France  
Tél : +33 (0) 472 663 322 • Fax : +33 (0) 478 508 903 3  
[contact@sedatelec.com](mailto:contact@sedatelec.com) • [www.sedatelec.com](http://www.sedatelec.com)